



Venta

moderne, polyvalent, facile à utiliser

Venta

La combinaison parfaite de la sécurité et du confort

Un lit moderne pour les soins stationnaires doit répondre à des exigences très élevées et variées. Il est très important de soulager le travail du personnel soignant : le lit doit pouvoir être manipulé facilement et de manière ergonomique même par manque de temps et dans les situations tendues. Le résident s'attend également à trouver un lit confortable et sûr, sans mesures de privation de la liberté. La technologie innovante requise pour répondre à ces exigences ne doit pas compromettre l'aspect du lit, car tous les résidents se sentent beaucoup mieux dans un environnement privé et agréable.

Avec le Venta, nous avons trouvé une réponse à ces questions et créé un lit de soins unique. Le Venta est un lit surbaissé doté d'un système de protection flexible qui protège et mobilise le résident. Avec son aspect élégant et la gamme de softcovers disponibles, le Venta est également un lit design confortable qui conviendra à tous les styles d'aménagement.



Table des matières

Variantes de modèle		Blocage	17
• Venta – Standard	4	Rallonge de lit	18
• Venta – Variante movo	6	Fonction 3 arrêts	20
• Venta – Variante forto	7	Concept d'utilisation flexible	22
Protection et mobilité dans toutes les situations		Système Out-of-Bed	24
• Système de protection pivotant	8	Système 24 volts	25
• Système de protection pivotant avec partie télescopique	10	Accessoires	26
Design		Équipements et options	28
• Softcovers	12	Service technique	
• Panneaux et décors	14	• Pièces de rechange, contrôle des lits, entretien	30
• Panneaux de tête et de pied	14	Le groupe Stiegemeyer	31
Châssis	15		
Sommiers	16		

Confort



Venta – Standard

- Réglage de la hauteur : 25 – 80 cm
- Lit surbaissé
- Hauteur de travail ergonomique : Soulage le personnel soignant en lui permettant de travailler sans s'abîmer le dos à hauteur des hanches
- Systèmes de protection pivotants avec hauteur de protection de 42 cm

Maniabilité



Venta – Variante movo

- Réglage de la hauteur : 28 – 83 cm
- Lit surbaissé
- Roulettes : Roulettes doubles de 100 mm pour une excellente maniabilité

Charge lourde



Venta – Variante forto

- Réglage de la hauteur : 31 – 85 cm
- Charge de travail sûre : 260 kg pour les résidents plus lourds
- Largeur du sommier : 100 cm
- Roulettes : Roulettes doubles de 125 mm

Venta – Standard


Le lit surbaissé cosy

Les établissements de soins doivent protéger leurs résidents des blessures par chute sans restreindre inutilement leur mobilité. Les mesures de privation de la liberté réduisent la qualité de vie des personnes nécessitant des soins, ont un impact négatif sur leur santé physique et mentale, et sont liées à d'importants obstacles juridiques.

Notre Venta vous aide à éviter les mesures de privation de la liberté. En tant que lit surbaissé, il réduit le risque de blessures par chute. Si le résident souhaite se lever, il peut régler le lit à une hauteur ergonomique d'environ 38 cm à l'aide de la télécommande. Le système de protection pivotant offre une protection conforme aux normes et laisse également la moitié inférieure du lit libre pour que le résident puisse monter et descendre du lit.

- La grande plage de réglage d'une hauteur d'env. 25 – 80 cm permet aux soignants de travailler sans s'abîmer le dos
- Le système de protection est utilisable à une main
- Sélection de télécommandes modernes au choix pour une utilisation intuitive
- Grande sélection de formes de panneaux et de décors agréables
- Les softcovers en tissu permettent d'adapter le lit à toutes les préférences

Dimensions extérieures/plage de réglage de la hauteur :

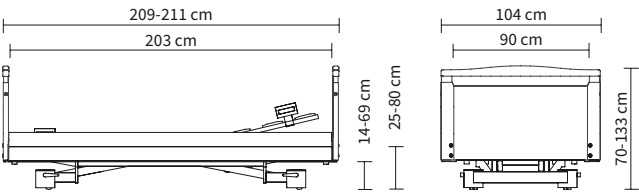

Lit surbaissé

Le Venta soulage le personnel soignant, encourage le résident à être mobile et séduit par son aspect confortable. Des éléments de design tels que les softcovers en option assurent une atmosphère confortable et privée.





Lit surbaissé


Venta – Variante movo

Excellentes propriétés de déplacement pour un quotidien dynamique

La variante movo du Venta se démarque par ses excellentes propriétés de déplacement. Les résidents alités peuvent ainsi prendre part à la vie quotidienne dans les pièces communes ou sur la terrasse et ressentir une nouvelle joie de vivre. Le personnel soignant est soulagé par les manœuvres facilitées, par exemple dans les chambres à plusieurs lits ou les couloirs étroits, et cela réduit également le risque de dommages dus à des collisions.

- Roulettes doubles de 100 mm avec d'excellentes propriétés de déplacement
- Blocage centralisé des roulettes par défaut
- Grande plage de réglage de la hauteur de 28 – 83 cm

Dimensions extérieures/plage de réglage de la hauteur :

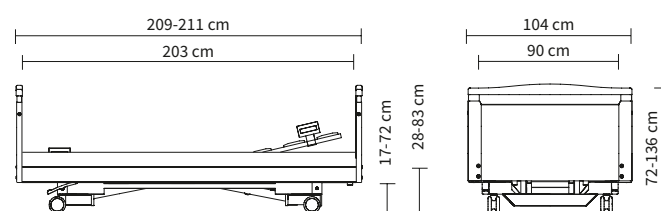

Lit hospitalier pour patients obèses


Venta – Variante forto


Confort pour les résidents plus lourds

Au cours des dernières 40 années, le nombre de personnes souffrant de surpoids a doublé dans de nombreux pays industrialisés. De plus en plus de personnes souffrent également d'obésité. Ce développement va également se faire ressentir dans les soins. La variante forto du Venta marque des points en tant que lit pour patients obèses en offrant plus de place, de confort et de sécurité. Avec ce modèle, votre établissement est prêt à faire face à tous les défis.

- Charge de travail sûre élevée de 260 kg
- Largeur de sommier de 100 cm par défaut
- Roulettes doubles robustes de 125 mm
- Plage de réglage de la hauteur de 31 – 85 cm pour une sortie de lit confortable et des soins ergonomiques
- Position assise confortable

Dimensions extérieures/plage de réglage de la hauteur :

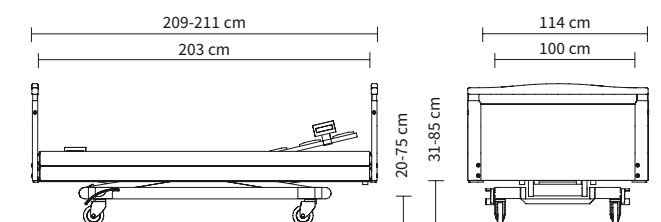

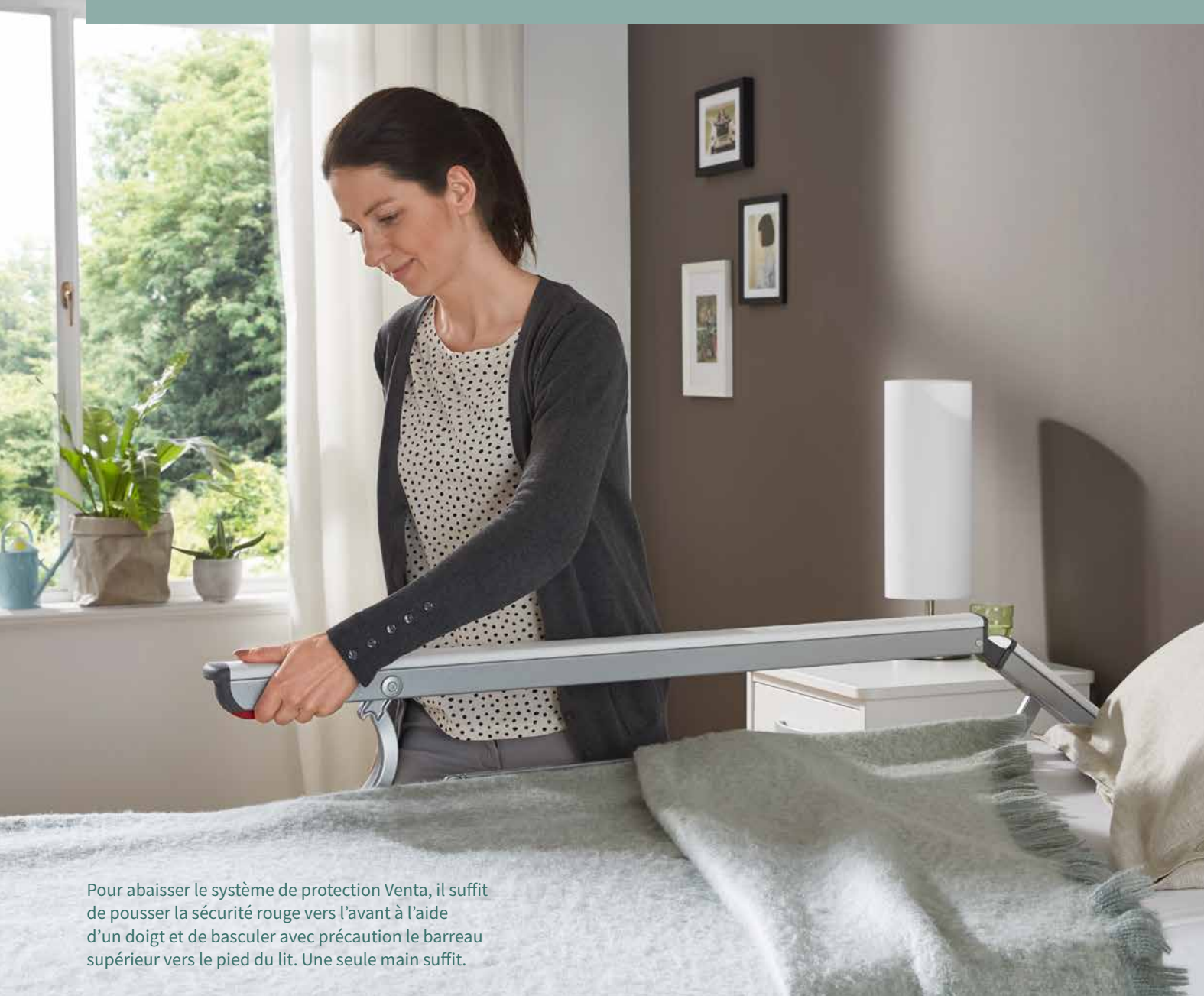

Pour abaisser le système de protection Venta, il suffit de pousser la sécurité rouge vers l'avant à l'aide d'un doigt et de basculer avec précaution le barreau supérieur vers le pied du lit. Une seule main suffit.

Système de protection pivotant

Protection et mobilité dans toutes les situations



Le système de protection innovant est l'un des plus grands avantages offerts par le Venta. La construction stable mais filigrane couvre 50 % de la longueur du sommier et offre ainsi une protection conforme aux normes sans empêcher le résident de quitter le lit côté pied. Vous évitez ainsi d'employer des méthodes de privation de la liberté et aidez à mettre en œuvre la philosophie de l'initiative Werdenfelser Weg et à maintenir la mobilité du résident.

- Vue dégagée entre les barreaux
- Forme épurée et élégante
- Lorsqu'elle est abaissée, la main courante devient une surface d'assise sur le bord du lit

Un remplissage en option permet de combler l'espace vide entre la main courante et le pied du lit lorsque la main courante est abaissée.



Commande à une main

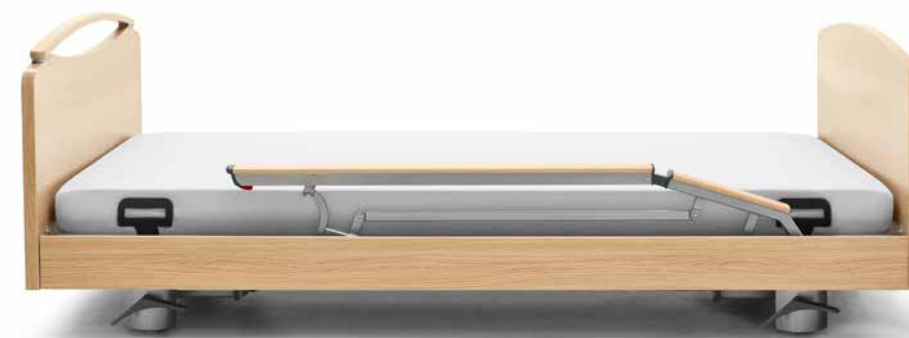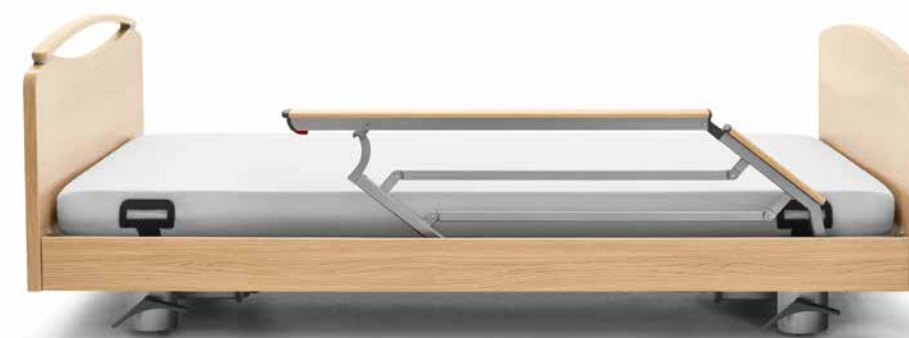

CLAIREMENT MEILLEUR

Commande facile à une main

L'utilisation simple du système de protection du Venta à l'aide d'une seule main aide le personnel soignant dans les situations tendues. Pour abaisser un élément, il suffit de pousser la sécurité rouge vers l'avant à l'aide d'un doigt tout en appuyant légèrement sur le barreau supérieur pour le basculer vers le pied du lit. Pour déployer à nouveau le système de protection, appuyez brièvement dessus et il se remet alors doucement et automatiquement en place et s'enclenche en toute sécurité. Si le soignant est debout au pied du lit, il peut utiliser ses deux mains pour déployer les éléments droite et gauche en même temps.



Systeme de protection pivotant avec partie telescopique

Protection flexible pour toutes les exigences

Si une personne necessitant des soins court un risque eleve de chute, par ex. si elle souffre de demence, une protection complete peut etre indispensable. Dans ce cas, nous recommandons la variante telescopique du systeme de protection du Venta disponible en option. Ce systeme couvre egalement seulement 50 % de la longueur du sommier en mode normal, mais barreaux peuvent etre etendus pour ouvrir la quasi totalite de la longueur du sommier et s'engager en toute securite au pied du lit. Si necessaire, l'espace libre restant au pied du lit peut etre comble a l'aide d'un remplissage disponible en tant qu'accessoire.

Le systeme de protection telescopique soulage egalement le personnel soignant grace a sa commande facile a une main. Cette variante seduit aussi par sa grande flexibilite. Si un resident a besoin de differents niveaux de protection selon son etat de sante, ou si le lit est utilise par de nombreux residents differents, le systeme de protection telescopique s'adapte a toutes les exigences. Cela simplifie les procedures logistiques d'amenagement et fait gagner du temps et de l'argent.



Lorsque la rallonge telescopique n'est pas etendue, le systeme de protection permet au resident de monter et descendre du lit librement.



Le systeme de protection telescopique s'adapte flexiblement aux besoins de protection des residents.



CLAIREMENT MEILLEUR Pièce complémentaire pour une protection totale

Le systeme de protection telescopique Venta couvre presque tout le cote du lit. Seul un petit espace libre reste ouvert cote pied. Il est possible de l'obturer a l'aide d'une piece complementaire disponible en option afin de garantir une protection totale. Le remplissage reste parfaitement en place et offre, avec sa poignee, une aide supplementaire au resident lorsque ce dernier se situe pres du lit par ex. Grace a sa construction filigrane, l'ensemble du systeme de protection offre une vue degagee dans la piece ou sur la fenetre.



La combinaison entre softcovers bleus et décor blanc craie crée une atmosphère fraîche et positive.

▲ Les softcovers pour les panneaux sont disponibles en style coussin (gauche) ou passepoilé (droite).

Design

Softcovers – plus de couleurs et d'élégance

La couleur éveille l'énergie et des émotions positives. Chez les personnes âgées et démentes, la couleur renforce les capacités cognitives et le sens de l'orientation. Les softcovers disponibles en option pour les panneaux et caches latéraux transforment le Venta en un lit design confortable qui convient à tous les aménagements et éveille chez le résident des sentiments de sécurité et d'identification avec sa chambre.



▲ Les couleurs disponibles vont des couleurs douces aux couleurs vives.

- 2 formes au choix : style coussin à coins carrés, style passepoilé à coins arrondis
- Tissu de qualité aux couleurs et motifs attrayants
- Softcovers pour panneaux et caches latéraux disponibles séparément et à combiner librement
- Installation et retrait simples
- Idéal pour réaliser des concepts de couleur dans des pièces ou unités



▲ Les softcovers s'installent sur les panneaux et se retirent en l'espace de quelques instants.

CLAIREMENT MEILLEUR


Nettoyage simple



Lorsque les personnes nécessitant des soins passent la plus grande partie de leur temps au lit et y prennent leurs repas, il peut arriver que des liquides ou aliments salissent le lit. Le tissu de qualité de nos softcovers est prêt à y faire face. Les substances liquides et visqueuses ne pénètrent pas dans le tissu. Vous pouvez utiliser une brosse, de l'eau et des produits de nettoyage pour retirer complètement et rapidement toute tache. Les softcovers ne sont pas lavables en machine.

Panneaux et décors

La sécurité et le design individuel du Venta se reflètent également dans les nombreuses formes de panneaux et décors en bois disponibles. De rectiligne et épuré aux formes arrondies, toutes sortes de styles sont disponibles. Les panneaux dotés de poignées facilitent encore davantage les manœuvres avec le lit et offrent au résident un endroit où se tenir. La gamme de teintes pour les décors va du blanc craie au brun foncé Choco Belle Noce opulent.

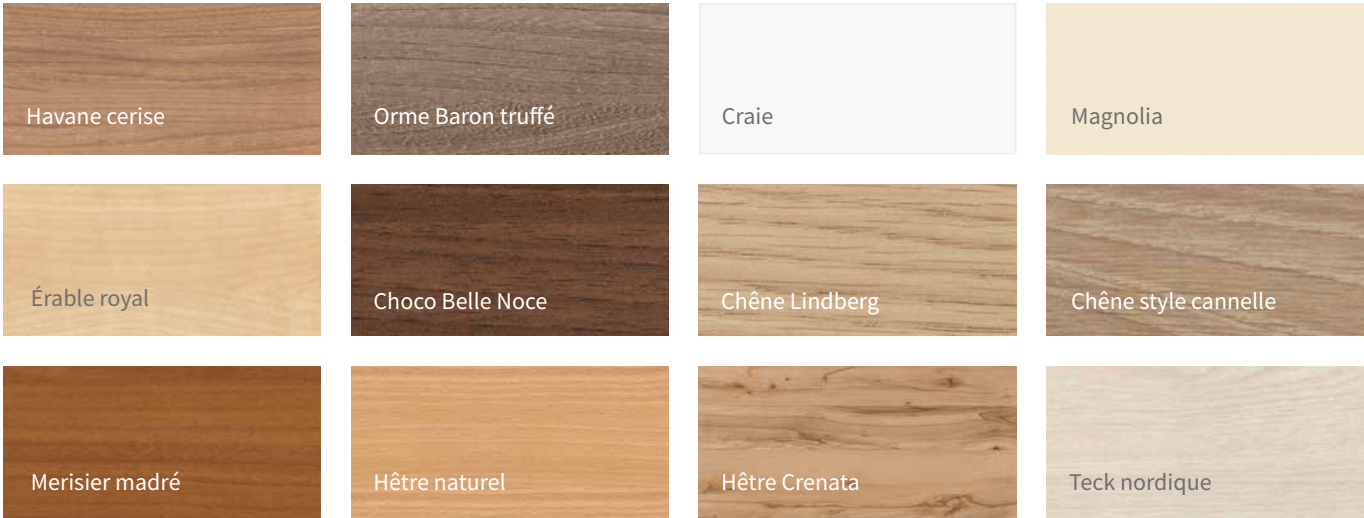

Panneaux de tête et de pied



Panneaux adaptés aux softcovers



Châssis aux lignes harmonieuses

Outre le cadre en bois personnalisé et les softcovers, le châssis contribue également au confort du Venta. Les extrémités de ses entretoises longitudinales sont recouvertes par défaut de 4 caches en plastique. Leur couleur argentée se marie parfaitement avec la teinte du châssis. Les caches recouvrent certains mécanismes du lit et offrent ainsi au lit une ligne harmonieuse. De plus, leur surface lisse les rend encore plus faciles à nettoyer en profondeur. Vous pouvez retirer les éléments en plastique sans outil en cas de besoin.

Un cache encore plus complet est disponible sur demande. Les deux éléments en plastique recouvrent les faces frontales du châssis et sont disponibles dans les couleurs de nombreux décors en bois. Si vous souhaitez uniquement recouvrir le panneau de tête ou de pied, vous pouvez également commander un seul élément. Le cache décoratif dissimule les aspects techniques du lit de soins et lui confère un aspect particulièrement privé. Ce cache peut également être nettoyé et retiré en toute simplicité.



▲ Par défaut, 4 caches en plastique recouvrent les extrémités des entretoises longitudinales.

CLAIREMENT MEILLEUR Une sélection de couleurs attrayantes





Sommiers

La base d'un sommeil réparateur

Un sommier optimal soutient l'effet du matelas et contribue aux bonnes propriétés d'hygiène du lit de soins. Le sommier hygiénique standard du Venta est facile à traiter. Les profondes fentes d'aération respirantes dans le polypropylène favorisent un microclimat sain et un sommeil réparateur. La plupart des matelas spéciaux peuvent être placés sans support de matelas de manière à ce que la hauteur de protection du système de protection soit suffisante.

Le sommier tout confort est disponible pour offrir un sommeil particulièrement réparateur et une adaptation idéale à la forme du corps. Il comporte 30 éléments de surface supportés de manière flexible avec 80 ressorts pivotants et différents niveaux de dureté. Il est un peu plus élevé que les modèles conventionnels, il convient donc de vérifier que la hauteur de protection du système de protection est suffisante en combinaison avec votre matelas.



▲ Les fentes d'aération du sommier hygiénique contribuent au microclimat sain du lit.



▲ Le sommier tout confort



Blocage – simple et sûr

Les excellentes propriétés de déplacement du Venta sont renforcées par ses freins faciles à utiliser. Le personnel soignant atteint la pédale de frein avec le pied sans aucun problème, même lorsque le sommier se trouve dans sa position la plus basse. Plus besoin de se baisser et de chercher longuement le frein dans les situations de stress.

Le Venta dispose par défaut d'un blocage des roulettes par paire. Encore plus pratique, le blocage centralisé des roulettes est disponible en option. Les modèles movo et forto disposent de cette fonction par défaut. La variante Venta movo, particulièrement mobile, est ainsi toujours prête à être déplacée et peut être bloquée en toute sécurité à l'emplacement souhaité en un simple geste du pied.

▲ Toujours à portée de pied : la pédale de frein du Venta dans sa version standard avec blocage des roulettes par paire.

▼ Le Venta est également disponible en option avec le système de blocage centralisé très pratique.



▼ Le modèle movo dispose par défaut de la fonction de blocage centralisé des roulettes.





Rallonge du lit

Espace et confort pour les résidents de grande taille

Avoir suffisamment de place dans son lit de soin est une condition essentielle au bien-être du résident. Les résidents de grande taille apprécieront donc la rallonge intégrée de 20 cm du cadre du lit dont Venta dispose par défaut. Le personnel soignant ou technique peut déployer cette rallonge dans le système de protection. L'espace qui se forme entre le système de protection et le panneau de pied ne compromet pas le fonctionnement conforme aux normes du lit. Bien entendu, des caches latéraux télescopiques sont disponibles comme accessoires et offrent un aspect continu et élégant.

Vous avez deux options pour rallonger le sommier. La variante la plus simple est d'ajouter un élément rembourré à insérer dans le cadre du lit à l'aide d'un support. Il reste fermement en place lors du réglage du sommier. Si le résident préfère être couché avec les jambes surélevées, ce qui est excellent pour la santé, nous recommandons d'utiliser la rallonge du relève-jambes. Elle se fixe simplement et sans outil sur le sommier. Un élément rembourré adapté peut être placé au pied ou bien, pour éviter l'apparition d'escarres aux talons dues à la jonction entre l'élément et le matelas, au niveau de la tête. Il est également possible d'utiliser un matelas de 220 cm de long.

- ▲ Les caches latéraux télescopiques en option se déploient automatiquement lorsque vous utilisez la rallonge de lit.

CLAIREMENT MEILLEUR

La rallonge de lit

- Chaque variante du Venta est équipée d'une rallonge du sommier de 20 cm.
- La rallonge se déploie sans outil et est utilisable conformément aux normes sans nécessiter d'autres transformations.
- Les caches latéraux télescopiques referment l'espace visuel au pied du lit.
- Le sommier peut être rallongé à l'aide d'un élément rembourré à placer au pied du lit et qui se déplace avec le matelas en cas de réglage du sommier.
- Il est possible, en alternative, de commander une rallonge du relève-jambes qui se déplace avec le matelas et permet par ex. une position surélevée des jambes.



Par défaut, le cadre du lit se rallonge de 20 cm. Le sommier peut être rallongé en option à l'aide d'un élément rembourré (ci-dessus) ou d'une pièce de rallonge relève-jambes (ci-dessous).

- ▼ Le personnel soignant commence par desserrer le boulon d'arrêt pour activer la rallonge du sommier.



- ▼ Ensuite, la rallonge se déploie sans le moindre effort.



- ◀ La rallonge relève-jambes innovante en option se déplace avec le matelas lors du réglage relève-jambes. Elle rallonge le cadre du lit ainsi que les éléments mobiles du sommier de manière efficace.



Fonction 3 arrêts

Travail et mobilisation ergonomiques

Un lit de soins moderne doit pouvoir être capable d'offrir des hauteurs différentes selon le moment de la journée et l'activité réalisée. La nuit, la position rabaisée protège le résident des blessures par chute, la position intermédiaire est idéale pour se lever ou se coucher, et le personnel soignant soulage son dos lorsque le sommier est relevé à hauteur des hanches. Grâce à la grande plage de réglage de la hauteur du Venta d'environ 25 – 80 cm, le lit peut être placé à la hauteur souhaitée de manière progressive à l'aide de la télécommande. La fonction 3 arrêts offre encore plus de confort : le lit ne s'arrête pas seulement automatiquement en position maximale et minimale, mais il effectue également un arrêt intermédiaire à une hauteur d'environ 38 cm.

- Réglage simple de la position de montée et de descente du lit la plus avantageuse d'un point de vue ergonomique
- Mobilisation simplifiée du résident
- La hauteur de l'arrêt intermédiaire peut être ajustée individuellement pour les résidents de très petite ou de très grande taille

◀ L'arrêt intermédiaire automatique à environ 38 cm est optimal pour monter et descendre confortablement du lit. Le système de protection offre suffisamment de place et sert d'aide à la mobilisation.



▲ La hauteur maximale de 80 cm permet même au personnel soignant de très grande taille de travailler sans s'abîmer le dos en se tenant droit.

Concept d'utilisation flexible

Des télécommandes pour les exigences individuelles

Le Venta se commande à l'aide d'une télécommande pouvant être choisie individuellement. Une utilisation simple et intuitive du lit avec la télécommande est doublement utile. Le personnel soignant doit garder une vue d'ensemble et le contrôle, même dans les situations tendues. Le résident doit pouvoir effectuer des réglages simples, même si ses capacités sont limitées, afin de jouir de plus de confort et de soulager le personnel soignant.

Vous avez le choix

En fonction de vos préférences, il est possible de choisir la télécommande rétroéclairée HB400 disponible de série ou, en option, la télécommande LCD dotée d'un écran rétroéclairé et de 3 touches.

- ▼ Sur la HB400, les touches sont parfaitement reconnaissables, quelle que soit l'heure : le jour grâce à leur encadrement noir transparent, la nuit grâce à un éclairage agréable. La fonction Trendelenburg est intégrée et ne nécessite par de télécommande supplémentaire. Toutes les options peuvent être verrouillées de manière sélective pour que le résident n'y ait pas accès.
- ▼ La télécommande LCD en option affiche les fonctions de réglage sur un grand écran éclairé. Grâce aux touches fléchées, l'option souhaitée peut être sélectionnée et activée sans effort. Le personnel soignant peut ouvrir brièvement toutes les fonctions verrouillées et régler le lit selon les besoins.
- ▼ Si le système Out-of-Bed a été choisi, une télécommande supplémentaire complète l'équipement du lit. La télécommande Out-of-Bed sert à activer le système. Elle permet aussi de régler la durée de notification et d'autres fonctions comme l'éclairage automatique.





CLAIREMENT MEILLEUR

Télécommande avec éclairage HB400

- 6 rangées de touches avec des symboles intuitifs
- Position proclive et déclive intégrée
- Touches facilement reconnaissables grâce aux contours
- Éclairage de nuit
- État de verrouillage de chaque fonction affiché via une LED
- Déverrouillage via un aimant sur le lit – pas de pièce séparée

▲ La nuit aussi, les touches éclairées sont facilement reconnaissables.


▲ Toutes les fonctions de réglage peuvent être verrouillées et déverrouillées individuellement au niveau de l'aimant dans la poignée étrier du matelas.

CLAIREMENT MEILLEUR


Système Out-of-Bed

Le système Out-of-Bed en option soutient le travail du personnel soignant la nuit. P. ex., il signale quand un résident ne revient pas dans son lit après être allé aux toilettes.

- Notification du personnel soignant après un intervalle de temps pré-réglé (sélection via la télécommande)
- Signal reçu sur l'installation d'appel
- Éclairage automatique avec lampe de lecture et éclairage sous le lit
- Le système de capteurs ultramoderne évite les fausses alertes

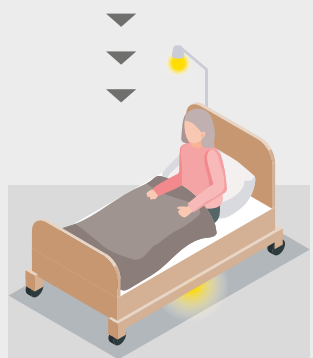

Le résident active l'éclairage automatique dès qu'il se redresse.

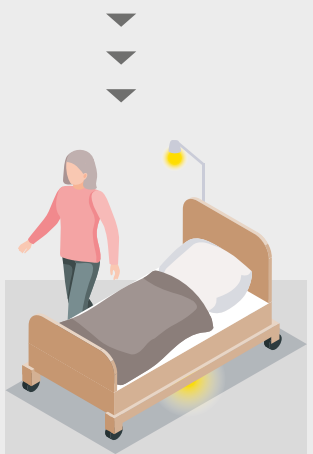

La notification après l'intervalle défini n'est déclenchée que lorsqu'il quitte le lit.



L'éclairage automatique s'active dès que le résident se redresse dans le lit. Cela permet au résident de bien s'orienter dans sa chambre la nuit.



Visualisation dans la chambre de soins.



Visualisation dans le couloir.



Une indication visuelle et sonore dans la chambre des soins est activée.



Entretien facile grâce au système 24 volts

Sécurité élevée, optimisation des coûts et utilisation en toute simplicité : le système 24 volts en option est un choix intéressant pour tous les lits Venta avec entraînement électrique.

La conversion de la tension en 24 volts se fait directement sur la prise de courant. Aucun composant sous tension de 230 volts ne se trouve à proximité de la personne nécessitant des soins qui bénéficie, ainsi, de plus de sécurité.

La nette réduction des mesures du courant de fuite permet d'économiser de l'argent et du travail. Avec le système 24 volts, elles ne doivent avoir lieu que tous les 10 ans et non plus tous les ans.


Mesure du courant de fuite tous les 10 ans seulement



▲ Un transformateur de fiche secteur génère une basse tension de protection directement à la prise. L'écarteur de mur en option sur le lit protège les prises, les murs et les meubles.

CLAIREMENT MEILLEUR

Des avantages considérables

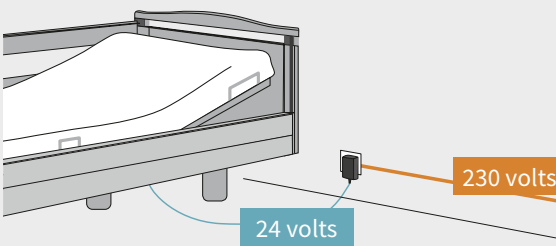

- Basse tension de protection à partir du transformateur sur la prise
- Aucun composant de 230 volts sur le lit
- Batterie disponible en option pour rendre le lit de soins indépendant du secteur en cas d'urgence
- Mesure du courant de fuite tous les 10 ans seulement
- Sécurité élevée pour le résident



Accessoires

Pour transformer le Venta en lit de rêve

Des matelas et housses optionnels sur les côtés du lit protègent le résident, simplifient la montée et la descente du lit et offrent un sentiment de confort grâce à leur sensation agréable et douce au toucher.

Un revêtement sur le système de protection empêche un résident agité de se cogner aux barreaux ou de passer la main entre les barreaux. Le revêtement de protection similicuir recouvre entièrement le système de protection de l'intérieur et de l'extérieur. Différentes longueurs sont disponibles pour le système de protection côté tête et le système de protection entièrement déployé. Les coussins de protection enfichables habillent le côté intérieur du système de protection avec une mousse formée de 20 mm d'épaisseur. Le résident bénéficie ainsi d'une protection maximale. Les coussins peuvent être fixés en toute sécurité avec les fermetures velcro. Ils sont disponibles pour le système de protection côté tête et côté pied.

Pour simplifier la montée et la descente du lit, des coussins rembourrés de différentes formes peuvent être insérés dans l'espace libre du côté du lit. Cela agrandit la surface d'assise du lit.



▲ Le revêtement similicuir est composé de cuir synthétique de qualité facile à désinfecter et de mousse.



▲ Le coussin rembourré facilite la montée et la descente du lit.



▲ La variante haute du coussin rembourré protège également le cache latéral.



▲ Le coussin de protection s'enfiche simplement sur le système de protection depuis l'intérieur.



Les accessoires d'origine de Stiegmeyer vous permettent d'adapter le Venta encore plus précisément à vos besoins. Des détails pratiques tels que les galets déflecteurs et les écarteurs de mur protègent le lit et le mobilier des dommages liés aux collisions. Nos lampes de lecture offrent une lumière agréable et dégagent très peu de chaleur. Ainsi, chaque Venta devient un lit de rêve sur mesure.

◀ L'élégante lampe de lecture Sira produit une lumière agréable.



▲ La lampe de lecture Sola fournit une lumière agréable et dégage peu de chaleur.



▲ La potence aide à trouver une position confortable dans le lit.




▲ L'écarteur de mur à tampon plat est idéal pour les cloisons légères.

CLAIREMENT MEILLEUR

L'écarteur

- Les écarteurs de mur préviennent les dommages liés aux collisions avec le mobilier et les prises de courant lors du déplacement du lit.

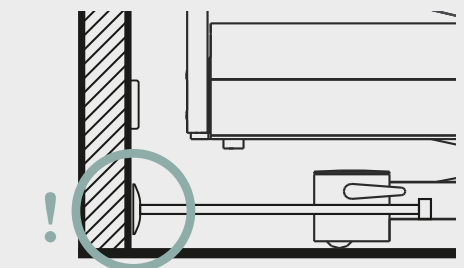

- Nombreux modèles différents au choix
- Le tampon absorbe l'énergie d'impact
- Le tampon plat disponible en option répartit la pression de manière encore plus uniforme – idéal pour les cloisons légères
- Dimensions adaptées à votre lit

Équipements et options

Variante de modèle	Venta – Standard	Venta – Variante movo	Venta – Variante forto
Dimensions et poids			
Dimensions extérieures (en fonction de l'encadrement en bois)	avec une largeur de sommier de 90 cm env. 104 x 211 cm	avec une largeur de sommier de 90 cm env. 104 x 211 cm	avec une largeur de sommier de 100 cm env. 114 x 211 cm
Sommier (dimensions du matelas)	90 x 200 cm ou 100 x 200 cm	90 x 200 cm ou 100 x 200 cm	100 x 200 cm
Répartition du sommier (RB / partie assise / RC / RJA)	env. 85 / 15 / 40 / 60 cm	env. 85 / 15 / 40 / 60 cm	env. 85 / 15 / 40 / 60 cm
Compensation de la longueur du relève-buste	env. 10 cm	env. 10 cm	env. 10 cm
Charge de travail sûre	225 kg	225 kg	260 kg
Passage sous le lit	env. 15 cm	env. 15 cm	env. 18 cm
Poids total	env. 140 kg	env. 140 kg	env. 150 kg
Moteurs			
Entièrement motorisé	✓	✓	✓
Technique OpenBus entièrement motorisée	✓	✓	✓
Concept de motorisation 24 volts avec transformateur externe	O	O	O
Composants électroniques			
Télécommande standard éclairée avec fonction Trendelenburg (HB400)	✓	✓	✓
Télécommande LCD avec fonction Trendelenburg	O	O	O
Système Out-of-Bed Smart	O	O	O
Systèmes de protection			
Système de protection pivotant	✓	✓	✓
Système de protection pivotant avec partie télescopique horizontale	O	O	O
Obturation de l'espace	O	O	O
Hauteur du système de protection	42 cm	42 cm	42 cm
Sommiers			
Sommier avec dimensions anthropométriques optimales (85/15/49/60 cm)	✓	✓	✓
Sommier hygiénique (polypropylène, amovible)	✓	✓	✓
Sommier confort (pas pour le sommier 100 cm)	O	O	–
Largeur du sommier 100 cm*	O	O	✓
Sommier en 4 parties	✓	✓	✓
Sommier pivotant en position de proclive	✓	✓	✓
Sommier pivotant en position de déclive	✓	✓	✓
Roulettes			
Roulette double	✓ Ø 50 mm	✓ Ø 100 mm	✓ Ø 125 mm
Blocage des roulettes 2x2	✓	–	–
4 roulettes à frein centralisé	O	✓	✓
Systèmes de déflecteurs muraux			
Galets déflecteurs à action horizontale	O	O	O
Roulette universelle à action horizontale et verticale	O	O	O
Écarteurs de mur sur le châssis	O	O	O
Plages de réglage			
Réglage de la hauteur	env. 25 - 80 cm	env. 28 - 83 cm	env. 31 - 85 cm
Réglage du relève-buste jusqu'à 70°	✓	✓	✓
Ajustage relève-cuisses jusqu'à 40°	✓	✓	✓
Position proclive (jusqu'à 12°)	✓	✓	✓
Position déclive (jusqu'à 12°)	✓	✓	✓

Variante de modèle	Venta – Standard	Venta – Variante movo	Venta – Variante forto
Divers			
Accessible aux lèves-personnes	✓	✓	✓
Réceptacles côté tête	✓	✓	✓
Rallonge du lit (20 cm)	✓ intégrée	✓ intégrée	✓ intégrée
Plusieurs choix d'encadrements en bois	✓	✓	✓
Plusieurs choix de décors en bois	✓	✓	✓
Ajustage autocontour	✓	✓	✓
Équipement supplémentaire			
Softcovers	O	O	O
Rallonge de lit intégrée avec barreaux de sécurité télescopiques et cache latéral	O	O	O
Porte-literie	O	O	O
Réceptacles côté pied	O	O	O
Éclairage sous le lit	O	O	O
Raccord de lampe intégré	O	O	O
Batterie intégrée	O	O	O

CLAIREMENT MEILLEUR

Série Venta – Normes de sécurité

- EN 14971
Analyse des risques pour dispositifs médicaux
- EN 60601-1
Sécurité pour appareils électromédicaux
- EN 60601-1-1
Compatibilité électromagnétique
- DIN EN 60601-2-52
Appareils électromédicaux



✓ = Équipement standard
O = En option
– = Non disponible



Service technique

Nos prestations - adaptées à vos exigences

Les lits hospitaliers et de soins de grande qualité du groupe Stiegmeyer sont accompagnés d'un service tout aussi qualitatif. Notre portefeuille de prestations comprend les activités clés que sont le contrôle, la remise en état, la formation et le conseil.

Nous suivons ici complètement les souhaits et les exigences de votre société. Peu importe comment vous souhaitez nous contacter, plusieurs choix s'offrent à vous. Les interlocuteurs personnels au téléphone vous aident pour commander les pièces de rechange et vous offrent un support technique complet. Plus de 50 collaborateurs du service technique se chargent sur site chez les clients des contrôles et des remises en état.

Notre service prend en charge tous les produits Stiegmeyer avec des pièces de rechange, même jusqu'à 15 ans après l'achat. À Herford, Stiegmeyer exploite un centre de service ultramoderne possédant une surface de stockage de 3 000 mètres carrés. Dans cet entrepôt automatisé se trouvent 7 500 articles en moyenne qui peuvent être expédiés dans toute l'Allemagne dans des délais généralement brefs. Vous pouvez aussi commander ces articles confortablement en ligne, sur notre portail de service : <https://service.stiegmeyer.com>



+49 5221 185 777
Lun.-jeu. de 8h à 16h30
Ven. de 8h à 14h



service@stiegmeyer.com

Pièces de rechange

Les clients peuvent commander à tout moment des pièces de rechange depuis notre portail de service. Les listes de favoris personnalisées ainsi que la consultation de tous les documents importants et le suivi des livraisons par Track & Trace garantissent confort et transparence. Il est possible de planifier à l'avance la gestion des lits dans l'établissement.

Contrôle des lits

Le contrôle des lits peut prendre la forme d'une inspection ou d'une maintenance. Lors de l'inspection, nous évaluons l'état technique du lit. Cela permet de déduire les mesures adéquates pour chaque lit. En plus de ces prestations, la maintenance englobe des mesures de remise en état préventives – par exemple l'ajustage des freins. La maintenance consiste à maintenir l'état de consigne. L'inspection et la maintenance englobent toujours les prescriptions spécifiques à chaque pays ainsi qu'un rapport de service que vous pouvez aussi consulter en ligne.

Réparation rapide du lit

En tant que fabricant, nous garantissons la livraison de pièces de rechange d'origine en un temps record. Nos collaborateurs réparent les dommages sur vos lits de manière rapide, compétente et avec un très bon rapport qualité-prix. Les remises en état particulières, les modifications ou les rénovations complètes sont effectuées dans notre centre de service à Herford.

STIEGMEYERGROUP



Solutions for people who care

Le groupe Stiegmeyer est le principal fabricant allemand de lits médicaux pour les hôpitaux, les établissements de soins et les soins à domicile. Avec ses tables de nuit, meubles et systèmes d'assistance numériques modernes, il est aussi un fournisseur innovant de solutions globales. L'entreprise familiale développe avec succès des offres pour les marchés internationaux dans plus de 100 pays.

Nos points forts :

- Le développement des produits dans notre siège à Herford, en Allemagne – la production dans quatre usines modernes en Allemagne et en Pologne
- La fabrication en Chine pour le marché chinois
- Des filiales et partenaires de distribution dans de nombreux pays
- Un service de premier ordre avec une livraison fiable des pièces de rechange
- Des formations et optimisations des processus pour nos clients
- Une action durable avec un fort engagement social

1 000 COLLABORATEURS DANS LE MONDE ENTIER	11 SITES en Allemagne, en Pologne, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Finlande, en Afrique du Sud et en Chine	Des OFFRES sur mesure pour tous les MARCHÉS
PLUS DE 100 000 lits produits par an	JUSQU'À 15 ANS de livraisons de pièces détachées	DISTRIBUTION dans plus de 100 pays
CERTIFICATIONS internationales		INGÉNIERIE ALLEMANDE

Notre expertise

- Hôpital
- Long séjour
- Soins à domicile
- Lits exclusifs
- Mobilier
- Service

Nos valeurs

- Expérience
- Humain
- Fiabilité
- Ciblé sur les solutions
- Ouverture
- Confiance

Nos marques





STIEGLMEYERGROUP

Solutions for people who care



Siège / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Siège / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn



stieglmeyer-group.com

Tous les produits et toutes les configurations ne sont pas disponibles dans chaque pays. Not all products and configurations are available in every country.
Sous réserve de modifications techniques. Les légères différences de couleurs par rapport aux originaux résultent de la technique typographique.
Edition 01/2024. Version 14b. Réf. 600293.
Subject to technical changes without notice. The shown product colours may differ slightly from the actual product. Last updated 01/2024. Version 14b. Item no. 600293.