



Elvido

Les lits surbaissés avec un soutien numérique

La famille Elvido : des lits sur mesure

Des solutions futées et modulaires pour des soins modernes



Le secteur des soins stationnaires fait face à des défis plus grands que jamais. Le manque de personnel, les inquiétudes liées à la relève et enfin les effets de la pandémie ont conduit dans de nombreux établissements à une intensification du travail qui exige de nouvelles solutions. Chaque détail de la génération actuelle de notre série de lits de soins Elvido vise un soulagement accru du personnel soignant et une meilleure qualité de vie pour les résidents. Ici, les systèmes d'assistance sont au cœur de tout, comme le système Out-of-Bed smart et une modification modulaire qui transforme chaque lit en une pièce sur mesure.

Dans la famille Elvido, découvrez aussi des lits pour patients obèses, des lits mécaniques ou des lits particulièrement mobiles que peuvent être utilisés dans chaque service, même en psychiatrie où les exigences sont les plus élevées.



Elvido vervo

- **Réglage de la hauteur :**
env. 25 – 80 cm
- **Minimiser le risque et les conséquences des chutes :**
 - lit surbaissé pour une protection sans mesures de privation de la liberté
 - suit la philosophie du Werdenfelser Weg
 - un supplément de sécurité avec le système Out-of-Bed en option



Elvido movo

- **Réglage de la hauteur :**
env. 28 – 83 cm
- **Maniabilité :**
 - grandes roulettes de 100 mm - manœuvres simplifiées, même dans les pièces étroites et lors de déplacements prolongés
 - surmonte sans problème les petits obstacles, par ex. les seuils de portes
 - le frein centralisé permet d'éviter de faire le tour du lit
 - la roulette directionnelle facilite les manœuvres

Table des matières

Elvido en un coup d'œil	4	Concept d'utilisation flexible	20
Variantes de modèle		Lumières	22
• Elvido vervo	6	Système 24 volts	23
• Elvido movo	7	Design	
• Elvido forto	8	• Panneaux et décors	24
• Elvido rega	9	• Panneaux de tête et de pied	24
Plus de protection et de qualité de vie pour les résidents	10	• Tissus et cuirs synthétiques	25
• Werdenfelser Weg	11	Des équipements utiles	
• Système Easy Click	12	• Couvertures pour châssis	26
• Système Vario Safe	13	• Sommier	26
Les groupes d'utilisateurs dans les établissements de soins	14	• Galets déflecteurs & écarteurs de mur	27
Ergonomie et mobilisation	16	• Housses de protection & coussins de protection	27
Possibilités de positionnement	17	• Matelas de protection anti-chute	27
Rallonge de lit	18	• Potences	27
Numérisation		Équipements et options	28
• Out-of-Bed smart	19	Service technique	
		• Pièces de rechange, contrôle des lits, entretien	30
		Le groupe Stiegmeyer	31



Elvido forto

- **Réglage de la hauteur :**
env. 30 – 85 cm
- **Charge de travail sûre :**
260 kg pour les applications exigeantes
- **Largeur du sommier :**
100 cm
- **Roulettes :**
roulettes doubles de 125 mm



Elvido rega

- **Réglage de la hauteur :**
env. 39 – 80 cm
- **Convient pour le service de psychiatrie :**
 - lit à réglage mécanique
 - stabilité élevée
 - réglage simplifié à l'aide d'une pompe à pédale hydraulique

Elvido en un coup d'œil

Préparation numérique :

- Le système Out-of-Bed et les futures fonctions de connectivité peuvent être utilisées



Systèmes de protection :

- Une protection optimale avec un système de protection à barreaux continus ou l'encouragement de la mobilité avec un système de protection combinable à barreaux discontinus avec appui de mobilisation intégré
- Les barreaux Easy Click amovibles sans outil permettent un nettoyage particulièrement minutieux
- Le système modulaire du Elvido prévoit aussi des systèmes de protection à barreaux discontinus ou caches Vario Safe



Variante vervo



Variante movo



Axé sur les besoins :

- Variante vervo : le multitalent particulièrement cosy
- Variante movo : de grandes roulettes pour une meilleure manœuvrabilité
- Variante forto : la variante pour charges lourdes (260 kg de charge de travail sûre) avec tous les avantages du modèle Elvido et une largeur confort de 100 cm
- Variante rega : la variante mécanique pour plus de sécurité en psychiatrie

Variante forto



Variante rega



Des sommiers pour toutes les exigences :

- Le sommier hygiénique monté de série avec ses éléments amovibles sans outil offre un accès pour la maintenance et se nettoie de manière optimale
- En option, le sommier confort à oscillation libre offre une position particulièrement agréable
- Rallonge du lit intégrée



Vieillir avec style :

- Le système Vario Safe offre une grande sélection de tissus, couleurs, formes, et motifs adéquats pour le lit







Elvido vervo

Le lit surbaissé polyvalent pour les exigences élevées

- Plage de réglage en hauteur env. 25 - 80 cm
- L'arrêt intermédiaire réglable permet aux résidents de toutes tailles de bien poser les pieds au sol ; orientation et sens de l'équilibre améliorés grâce à la perception tactile du sol avec la plante des pieds
- Le système d'entraînement OpenBus installé par défaut permet d'utiliser le système Out-of-Bed en option

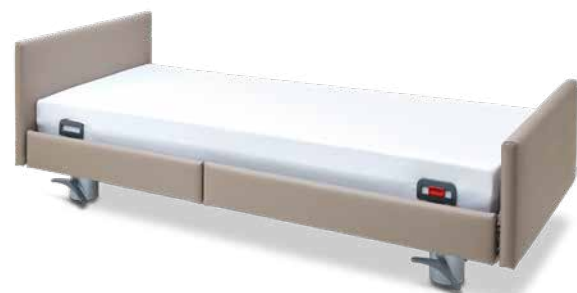

Dimensions extérieures/plage de réglage de la hauteur :

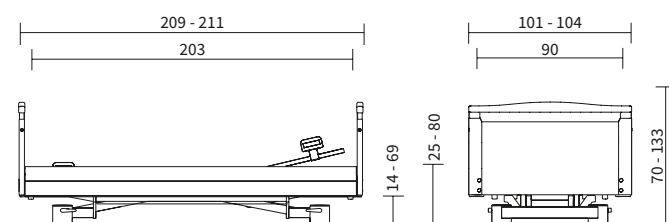


Elvido movo

Le lit surbaissé particulièrement mobile

- Grandes roulettes de 100 mm pour des manœuvres simplifiées
- Le lit peut être déplacé sans effort dans une autre chambre de soins ou dans un espace hygiénique à des fins de traitement
- Les personnes immobilisées nécessitant des soins peuvent prendre part à la vie sociale depuis leur lit dans les pièces communes ou sur la terrasse
- Roulette directionnelle pour des manœuvres encore plus simples



Dimensions extérieures/plage de réglage de la hauteur :

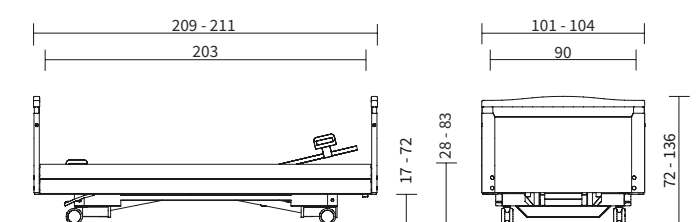




Elvido forto

Plus de confort pour les résidents de grande taille et au poids élevé

- Charge de travail sûre de 260 kg pour les résidents en surpoids
- Largeur du sommier de 100 cm et rallonge de lit facile à utiliser pour plus de place et de confort
- Hauteur de travail ergonomique de jusqu'à 85 cm pour faciliter les soins
- Grandes roulettes doubles de 125 mm pour d'excellentes propriétés de déplacement, même en cas de charge de travail élevée



Dimensions extérieures/plage de réglage de la hauteur :

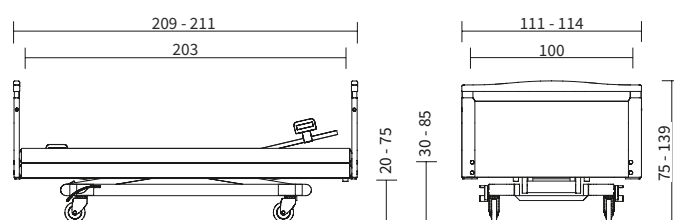


Elvido rega

Le lit de soins pour les établissements psychiatriques

- Réglage en hauteur de 39 à 80 cm à l'aide d'une pompe à pédale amovible en option
- Sommier métallique robuste à grille soudée
- Étriers de fixation en option sur les dispositifs de relevage et les profilés du cadre du sommier
- Idéal pour les pièces sans source d'alimentation



Dimensions extérieures/plage de réglage de la hauteur :

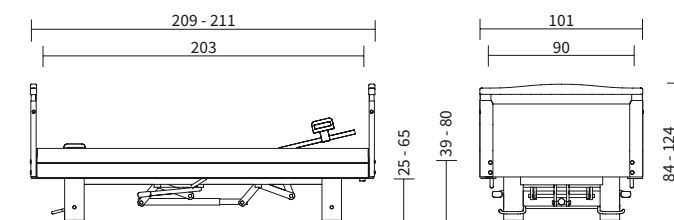

Plus de protection et de qualité de vie pour les résidents

Bien-être sans mesures de privation de la liberté



La bonne santé et l'autonomie prolongée des résidents contribuent de manière décisive au bien-être et au soulagement de toutes les personnes présentes dans l'établissement de soins. Les lits surbaissés de la série Elvido favorisent la protection, la mobilisation et le confort sans restreindre la liberté. De nombreux établissements ont travaillé durant la décennie passée à réduire l'utilisation des mesures de privation de la liberté de plus de 50 %.

Avec ses nombreuses options de réglage d'aide et les systèmes de protection à barreaux discontinus intelligents, notre Elvido est conçu pour cet objectif.



▲ Position jambes hautes pour se détendre et renforcer la circulation.



▲ Position assise pour une communication à hauteur d'yeux et les repas au lit.

Werdenfelser Weg



▲ Position basse d'env. 25 cm pour éviter les blessures dues aux chutes.

- La philosophie du Werdenfelser Weg a pour objectif d'éviter autant que possible les mesures de privation de la liberté.
- Les systèmes de protection à barreaux discontinus et combinables offrent une protection conforme aux normes sur plus de 50 % du sommier, même lorsqu'ils sont relevés uniquement côté tête.
- Le résident peut quitter son lit à tout moment côté pied.

CLAIREMENT MEILLEUR

Des lits surbaissés avec des systèmes de protection à barreaux discontinus

- Équilibre idéal entre protection et autonomie
- Permet des positions appropriées du sommier et du système de protection pour le sommeil et le temps libre
- La position surbaissée de l'Elvido d'env. 25 cm réduit le risque de blessure en cas de chute
- Il est possible de renoncer à l'utilisation du système de protection ou d'utiliser des éléments latéraux courts pour favoriser la mobilisation côté tête
- Il est possible d'aller aux toilettes la nuit sans obstacle – si souhaité avec la sécurité supplémentaire du système Out-of-Bed



Easy Click – une manipulation facile et une excellente hygiène

Système de protection à barreaux continus et combinable au montage sans outil

Certains résidents particulièrement susceptibles de tomber ont besoin d'une protection maximale – le système de protection à barreaux continus classique s'avère souvent être le meilleur choix dans ce cas. Si besoin, il est possible d'utiliser de l'autre côté du lit le système de protection à barreaux discontinus combinable, ce qui offre un équilibre idéal entre sécurité et liberté. Le poteau central du système de protection combinable constitue en outre une aide solide pour la mobilisation. La série Elvido comporte le système intelligent Easy Click de série pour les deux systèmes de protection. Les barreaux peuvent ici être « clipsés » sans outil sur les supports prémontés. Cela facilite l'installation et le nettoyage du lit. Les capuchons en plastique élégants protègent l'intérieur des barreaux contre la saleté et les liquides. Avec le système Easy Click également, les systèmes de protection peuvent être interchangeables entre plusieurs lits, pour plus de rentabilité.



◀ Easy Click permet de monter et de retirer les barreaux sans outil sur les supports prémontés.

▶ Si vous utilisez la rallonge du lit, vous pouvez monter des barreaux plus longs.



▲ Le déclenchement facile à manipuler sur les panneaux de tête et de pied permet d'abaisser les barreaux.



▲ Des capuchons en plastique protègent les barreaux des endommagements ainsi que de la pénétration de la saleté et des liquides.



▲ Pour abaisser les barreaux du système de protection combinable, il suffit d'appuyer sur le bouton du poteau central. Le poteau lui-même peut être retiré et rangé dans un support sous le lit lorsqu'il n'est pas utilisé.



Vario Safe – le système pour les exigences changeantes

La construction modulaire ouvre de nouvelles possibilités au quotidien

Grâce à notre système Vario Safe breveté, il est possible de monter et retirer les panneaux de tête et de pied sans outil sur tous les modèles Elvido. C'est un avantage considérable en cas de soins plus intensifs et cela permet également d'ajouter de nouveaux panneaux en fonction des envies et de modifier l'apparence du lit.


En guise d'alternative au système de protection à barreaux continus ou combinable, le système Vario Safe comprend aussi un système de protection à barreaux discontinus. Ici, les éléments individuels peuvent être relevés sur deux niveaux et offrent une sécurité sur mesure. Si une protection n'est pas nécessaire sur toute la longueur du lit, il est p. ex. possible de combiner un système de protection côté tête avec des caches latéraux côté pied. Tous ces éléments peuvent être retirés et remplacés sans outil. Le graphique suivant montre les nombreuses possibilités.

Échanger ou retirer les panneaux de pied

- Sans le panneau, vous avez un meilleur accès au résident
- Panneau de pied haut ou bas au choix
- Décors en bois, tissu et cuir synthétique attrayants au choix

Échanger le panneau de tête en quelques secondes si besoin

- Prêt pour les soins intensifs : physiothérapie, soins corporels et soins des pieds

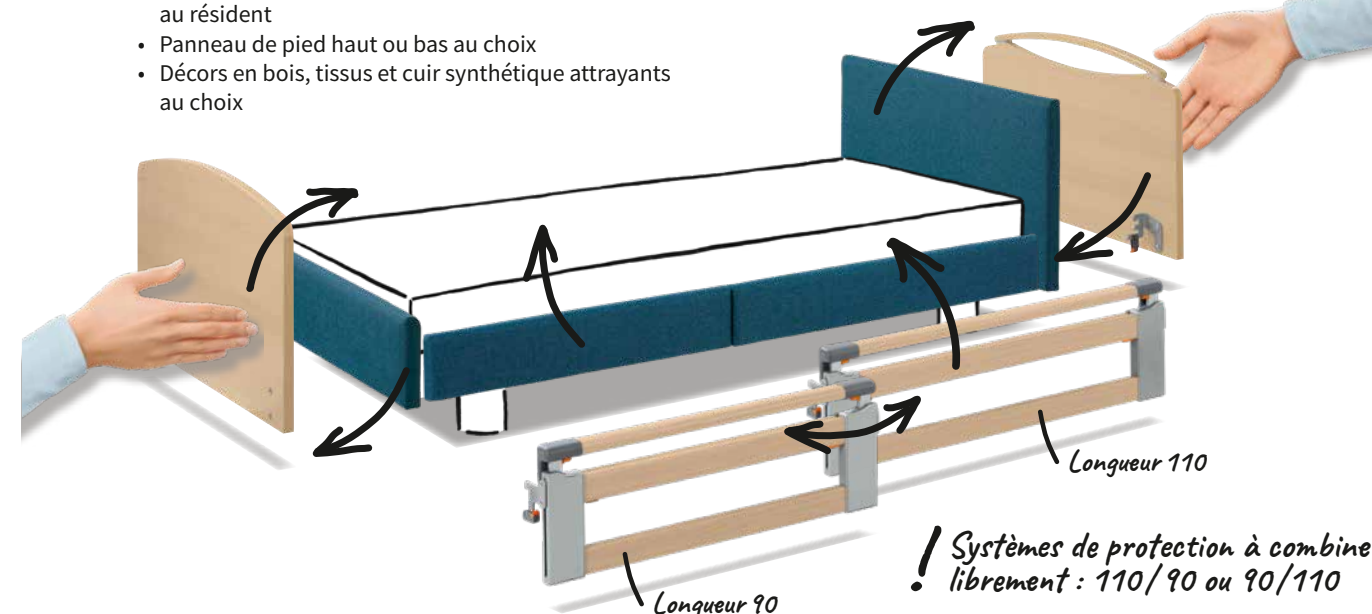

! Systèmes de protection à combiner librement : 110/90 ou 90/110

Monter ou démonter le système de protection à barreaux discontinus en cas de besoin

- 2 éléments de 90 et 110 cm de long peuvent être combinés librement ou utilisés individuellement
- Une protection de 110 cm installée côté tête offre une protection conforme aux normes
- Une protection de 90 cm installée côté tête offre un sentiment de sécurité et d'orientation tout en laissant suffisamment de place pour monter et descendre du lit
- En cas d'utilisation de la rallonge de lit intégrée, deux éléments de 110 cm peuvent être installés

Systèmes de protection à barreaux discontinus télescopiques sur deux niveaux

- Système de protection à barreaux discontinus télescopique vers le haut sur deux niveaux ou relevable en diagonale
- Un déclenchement sans effort avec les touches ergonomiques



Une protection sur le cadre du lit garantit une pose du système de protection à la fois sûre et conforme aux normes.

Un lit pour les exigences changeantes de toutes les personnes de l'établissement de soins

Plus de confort, de protection et de soulagement pour chaque groupe d'utilisation

« Nous avons besoin de lits qui peuvent s'adapter aux exigences changeantes. »

Claudia Wagner,
Direction d'établissement
de soins



Dans notre établissement, il est important que les résidents soient valorisés comme des individus et que leurs besoins soient satisfaits. Les lits de la série Elvido nous y aident – et nous permettent d'associer confort et travail économique. Grâce à la flexibilité du système Vario Safe, les lits peuvent être adaptés rapidement et à tout moment aux exigences changeantes. Cela économise le temps et l'argent dont nous avons besoin pour nos tâches de soins.

- Adaptation sans effort du système de protection au lieu d'utilisation du lit
- La diversité des variantes de la série Elvido permet de sélectionner des produits sur mesure
- Le look attrayant des lits améliore l'image de l'établissement



« Le lit doit aider à préserver la santé de nos résidents. »

Lea Kim,
Prestation de soins



La mobilité autonome est le meilleur moyen de préserver la santé et la joie de vivre de nos résidents. Mais, ce faisant, nous devons éviter le plus possible les blessures dues aux chutes. Les modèles Elvido, avec leur grande plage de réglage de la hauteur, servent de lits surbaissés protecteurs pendant les phases de repos tout en offrant une hauteur ergonomique pour se lever. Aussi, les systèmes de protection à barreaux discontinus sur lesquels les résidents peuvent s'appuyer permettent de se lever plus facilement et soulagent mon personnel soignant.

- Plage de réglage de la hauteur de 25 cm pour les phases de repos jusqu'à 80 cm pour travailler sans solliciter le dos
- Le système de protection côté tête sert d'appui de mobilisation
- Sommier à réglage flexible pour un positionnement bon pour la santé dans le lit



« Pour nos résidents, je souhaite une protection individuelle et une hygiène sûre. »

Peter Kaminski,
Technicien interne



En tant que techniciens internes, nous adorons la série Elvido. Avec les systèmes Vario Safe ou Easy Click, nous pouvons modifier ces lits sans outil en quelques instants. Cela augmente la protection pour nos résidents et nous facilite le travail. Les systèmes de protection et les éléments amovibles de l'encadrement du lit peuvent en plus être nettoyés de façon particulièrement simple et minutieuse – aucun endroit caché n'est oublié. Ainsi, avec nos lits de soins, nous atteignons notre objectif d'une hygiène optimale.

- Échange et modification de tout l'encadrement du lit avec Vario Safe
- Retrait sans outil des barreaux du système de protection avec Easy Click
- Lits robuste ne nécessitant que peu d'entretien – testés bien au-delà des exigences normatives



« Je souhaite profiter de ma vie en établissement de soins en étant libre et autonome. »

Rebecca Stein,
Résidente d'un établissement
de soins



Quand je vivais encore dans mon appartement, j'étais fière de ma belle chambre. J'ai été d'autant plus ravie quand j'ai vu mon lit de soins dans mon nouveau chez moi. Il est si cosy et confortable que j'aime y passer du temps. Chaque matin, je règle le lit avec la télécommande à une hauteur qui me permet de me lever sans problème. Ainsi, je démarre une nouvelle journée de manière sûre et autonome.

- Arrêt intermédiaire réglable individuellement à une hauteur idéale pour se lever
- Grande sélection de décors en bois cosy, de rembourrages et de formes pour les panneaux de tête et de pied
- Le quotidien à hauteur d'yeux grâce à la position assise confortable



Ergonomie et mobilisation

Soulagement du personnel soignant au quotidien

Les maux de dos constituent l'un des principaux problèmes dans les métiers des soins – jusqu'à deux tiers du personnel soignant en souffre selon les sondages. Il est d'autant plus important d'avoir la possibilité de travailler dans une position droite qui soulage le dos dans de nombreuses situations. La position la plus élevée des lits Elvido de jusqu'à 85 cm y contribue, tout en permettant un accès facile au résident grâce aux éléments modulaires amovibles. En outre, les nombreuses aides à la mobilisation de la construction offrent au résident la possibilité de se lever plus facilement, sans aide extérieure.




CLAIREMENT MEILLEUR


Prévenir efficacement les problèmes de dos

- Très grande plage de réglage de la hauteur d'env. 25 à 85 cm selon la variante de modèle
- Accès facile aux personnes nécessitant des soins
- Soulagement grâce à la mobilisation autonome du résident

Hauteurs de réglage du lit

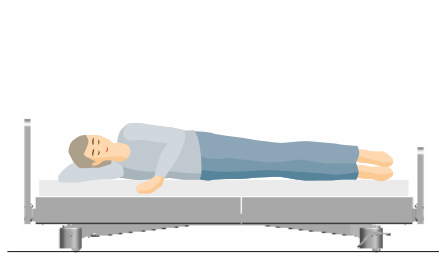

▲ Position basse d'env. 25 cm pour éviter les blessures dues aux chutes.

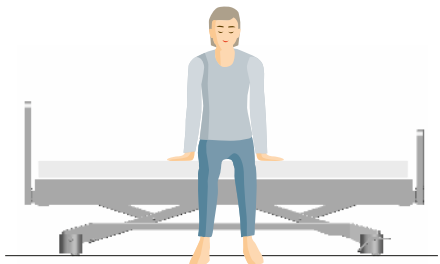

▲ Avec le réglage individuel du sommier, les résidents peuvent se lever de manière autonome avec beaucoup plus de facilité. L'arrêt intermédiaire peut être réglé individuellement, le réglage en usine est effectué à 38 cm.



▲ La position la plus élevée se situe, selon la variante du modèle, entre 80 et 83 cm – idéale pour travailler à hauteur de hanches, en soulageant son dos.

Possibilités de positionnement


Aider la guérison et favoriser l'autonomie

Les possibilités de réglage variées de la série Elvido améliorent à long terme la santé des résidents et aident les soignants dans leur travail. Le sommier flexible permet des positions comme une position proclive pour la prévention des aspirations et pneumonies ainsi que la position Cardiac Chair pour soulager le cœur ou encore la position Fowler pour faciliter la respiration. La position déclive et la position jambes hautes inclinées sont disponibles pour lutter contre les chocs et soulager les veines.




◀ La position Fowler facilite la respiration et améliore l'alimentation en oxygène.


Positionnement

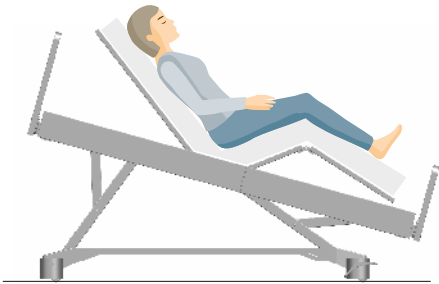


▲ La position Cardiac Chair soulage le cœur et renforce la circulation.

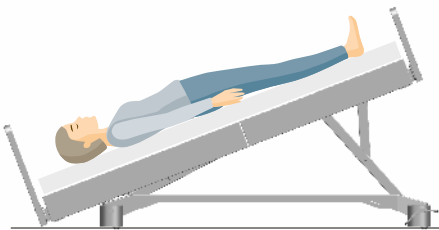

▲ La position déclive peut amoindrir les conséquences d'un choc.

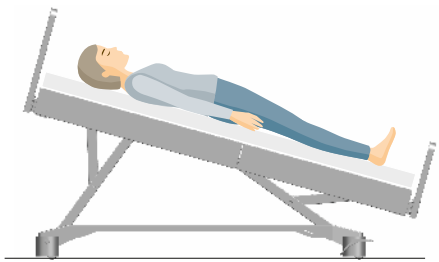

▲ Le degré de pivotement du corps du lit permet une position proclive pour faciliter la déglutition et prévenir les aspirations, par exemple.

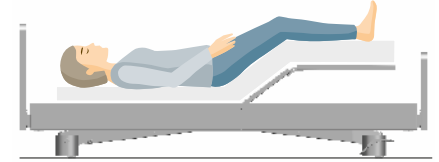

▲ Le réglage du relève-jambes jusqu'à env. 22° sert à soulager et à réduire la douleur.


Rallonge du lit

Les résidents de grande taille ont besoin de plus de place. La rallonge intégrée du cadre de lit de 20 cm assure ici un confort optimal et rend nos lits Elvido particulièrement adaptés à l'avenir.

Si l'Elvido doit être utilisé uniquement avec un système de protection côté tête, voire aucun, la rallonge peut en principe être utilisée sans autres équipements supplémentaires, avec un matelas plus long.

Le lit rallongé est bien sûr plus cosy et plus sûr avec les systèmes de protection et caches adéquats. Selon le système modulaire, il existe ici de nombreuses possibilités sur mesure. Le relève-jambes peut également être allongé au choix.

Sur les lits avec le système Vario Safe, en cas d'utilisation de la rallonge de lit, il est possible de remplacer les éléments latéraux de 90 cm de long par des éléments de 110 cm de long, sans outil.

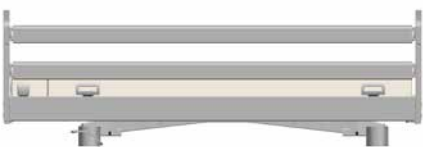


Easy Click avec des barreaux plus longs.




Easy Click avec barreaux télescopiques et caches.




Sans système de protection, aucune autre pièce n'est nécessaire, élément de remplissage du cache disponible en option.

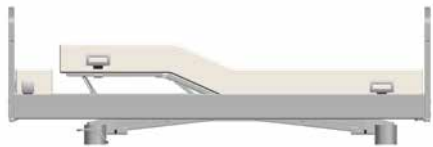

Partie matelassée enfichable dans 3 hauteurs différentes, selon le matelas.

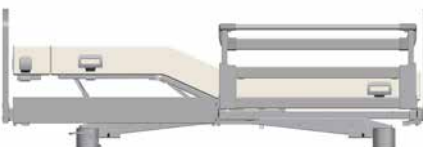

Avec des éléments latéraux Vario Safe de 20 cm rallonge 2 x caches ou système de protection 110 cm

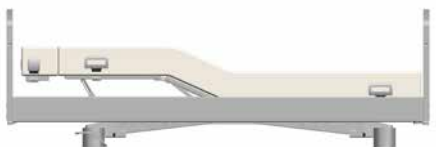

Rallonge de relève-jambes permettant de surélever les pieds.

CLAIREMENT MEILLEUR

Plus de place et de confort grâce à une rallonge de lit à la manipulation simple

- En moyenne, les personnes sont de plus en plus grandes – les établissements de soins doivent y être préparés
- L'activation simple de la rallonge de lit soulage le personnel
- Des options pratiques pour rallonger le sommier

Out-of-Bed smart

Le système Out-of-Bed en option soutient le travail du personnel soignant la nuit. P. ex., il signale quand un résident ne revient pas dans son lit après être allé aux toilettes.

- Notification du personnel soignant après un intervalle de temps pré réglé (sélection via la télécommande)
- Signal reçu sur l'installation d'appel
- Éclairage automatique avec lampe de lecture et éclairage sous le lit
- Le système de capteurs ultramoderne évite les fausses alertes



Le résident active l'éclairage automatique dès qu'il se redresse.



La notification après l'intervalle défini n'est déclenchée que lorsqu'il quitte le lit.



Si souhaité, l'éclairage sous le lit et la lampe de lecture peuvent être activés dès que le résident se redresse pour lui permettre une orientation plus sûre.



Lorsque le résident quitte son lit, le système Out-of-Bed notifie le personnel soignant après une durée pré réglée.



Visualisation dans la chambre de soins.



Visualisation dans le couloir.



Une indication visuelle et sonore dans la chambre des soins est activée.

Concept d'utilisation flexible

Des télécommandes pour des exigences individuelles

L'Elvido se commande à l'aide d'une télécommande pouvant être choisie individuellement. Une utilisation simple et intuitive du lit avec la télécommande est doublement utile. Le personnel soignant doit garder une vue d'ensemble et le contrôle, même dans les situations tendues. Le résident doit pouvoir effectuer des réglages simples, même si ses capacités sont limitées, afin de jouir de plus de confort et de soulager le personnel soignant. Vous avez le choix :

HB400

Sur la HB400, les touches sont parfaitement reconnaissables, quelle que soit l'heure : le jour grâce à leur encadrement noir transparent, la nuit grâce à un éclairage agréable. La fonction Trendelenburg est intégrée et ne nécessite pas de télécommande supplémentaire. Toutes les options peuvent être verrouillées de manière sélective pour que le résident n'y ait pas accès.

Télécommande LCD

La télécommande LCD en option affiche les fonctions de réglage sur un grand écran éclairé. Grâce aux touches fléchées, l'option souhaitée peut être sélectionnée et activée sans effort. Le personnel soignant peut ouvrir brièvement toutes les fonctions verrouillées et régler le lit selon les besoins.

Télécommande Out-of-Bed

Si Out-of-Bed smart a été choisi, une télécommande supplémentaire complète l'équipement du lit. La télécommande Out-of-Bed sert à activer le système. Elle permet aussi de régler la durée de notification et d'autres fonctions comme l'éclairage automatique.



▲ La nuit aussi, les touches éclairées sont facilement reconnaissables.



▲ Toutes les fonctions de réglage peuvent être verrouillées et déverrouillées individuellement au niveau de l'aimant dans la poignée étrier du matelas.

CLAIREMENT MEILLEUR

Télécommande avec éclairage HB400

- 6 rangées de touches avec des symboles intuitifs
- Position proclive et déclive intégrée
- Touches facilement reconnaissables grâce aux contours
- Éclairage de nuit
- État de verrouillage de chaque fonction affiché via une LED
- Déverrouillage via un aimant sur le lit – pas de pièce séparée

Lampes

Qualité de vie et protection

Nos lampes permettent aux résidents de disposer d’une lumière agréable et chaleureuse sans déranger leurs voisins de chambre. Leur très faible dégagement de chaleur garantit une sécurité supplémentaire.



▲ Sur le modèle Sola, on peut choisir entre la commande via un interrupteur sur la tête de la lampe ou un interrupteur à cordon.

▲ Les lampes Stella et Sira prennent en plus en charge l’éclairage automatique en connexion avec le système Out-of-Bed.

Les modèles Sola, Stella et Sira séduisent par leur design élégant. Il est possible de les placer dans les douilles de potence, sur le tube de la potence ou sur la table de chevet.



CLAIREMENT MEILLEUR

Sélection et raccordement pour chaque besoin

- Divers designs sont disponibles : élégant et élancé ou avec un accent coloré sur l’abat-jour et une ampoule LED.
- Tous les modèles peuvent être raccordés directement sur le lit avec un connecteur de 3,5 mm et des câbles d’adaptateur correspondants ou sur une prise secteur avec un bloc d’alimentation.
- Les modèles Stella et Sira peuvent être intégrés dans l’éclairage automatique du système Out-of-Bed.
- En mode manuel, Stella peut être commandée avec un interrupteur sur la tête de la lampe et Sira avec un interrupteur à cordon. Pour le modèle Sola, les deux options sont possibles.



Entretien facile grâce au système 24 volts

Sécurité élevée, optimisation des coûts et utilisation en toute simplicité : le système 24 volts en option est un choix attrayant pour tous les lits Elvido avec entraînement électrique.

La conversion de la tension à 24 volts se fait directement à la prise de courant. Aucun composant sous tension de 230 volts ne se trouve à proximité de la personne nécessitant des soins qui bénéficie, ainsi, de plus de sécurité.

La nette réduction des mesures du courant de fuite permet d’économiser de l’argent et du travail. Avec le système 24 volts, elles ne doivent avoir lieu que tous les 10 ans et non plus tous les ans.


Mesure du courant de fuite tous les 10 ans seulement



▲ Un transformateur de fiche secteur génère une basse tension de protection directement à la prise. L’écarteur de mur en option sur le lit protège les prises, les murs et les meubles.

CLAIREMENT MEILLEUR

Des avantages considérables

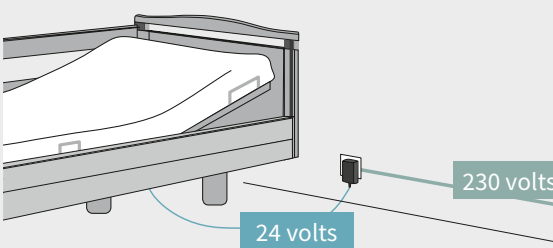


- Basse tension de protection à partir du transformateur sur la prise
- Aucun composant de 230 volts sur le lit
- Batterie disponible en option pour rendre le lit de soins indépendant du secteur en cas d’urgence
- Mesure du courant de fuite tous les 10 ans seulement
- Sécurité élevée pour le résident

Design

Panneaux et décors

La série Elvido bénéficie d'un grand nombre de panneaux de tête et de pied cosy, disponibles avec et sans poignée. Faites aussi votre choix parmi les douze décors en bois actuels – du ton craie blanc au décor Hêtre Crenata moderne avec ses veines marquées. Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour vous conseiller.

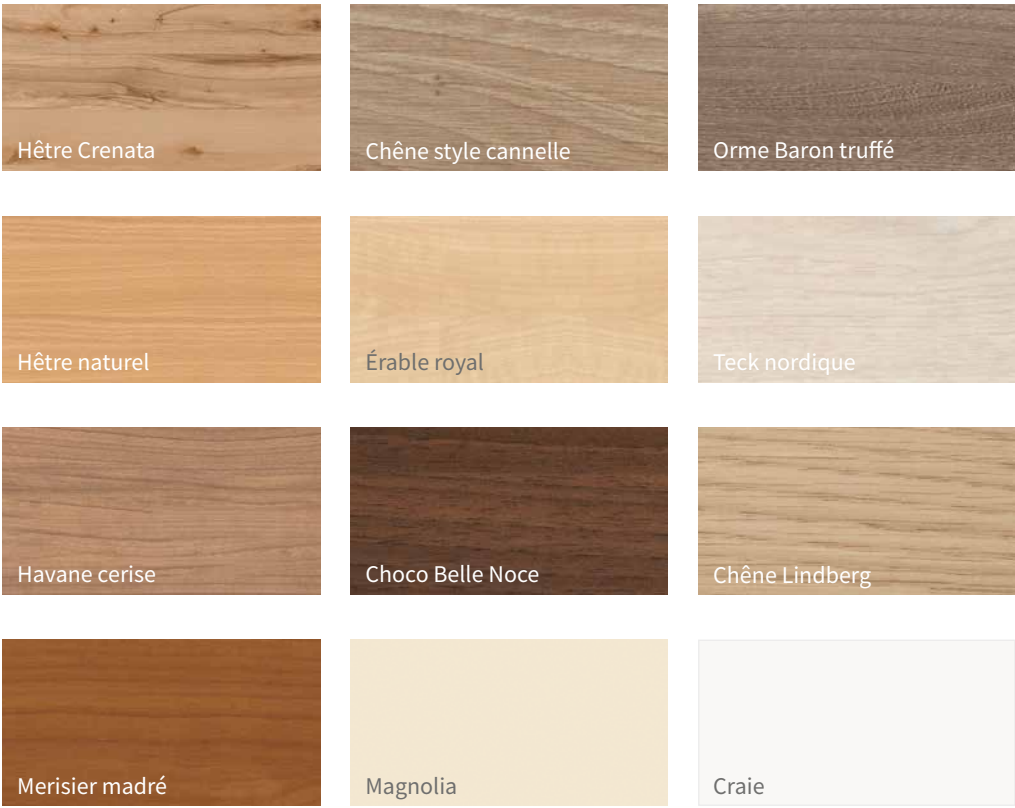

Panneaux de tête et de pied




Tissus et cuirs synthétiques


Des tissus et cuirs synthétiques attrayants sont disponibles pour les panneaux Nobla et les caches latéraux du système Vario Safe. Vous trouverez l'intégralité de l'offre sur le site internet de notre partenaire Delius. Veuillez respecter les instructions du fabricant lors du nettoyage des tissus et cuirs synthétiques.



Échantillons des revêtements en tissu

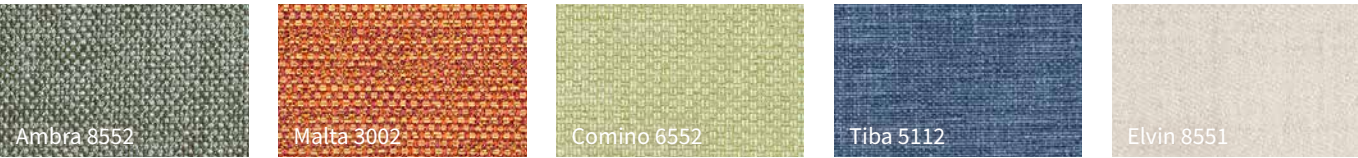

Extrait des revêtements en cuir synthétique

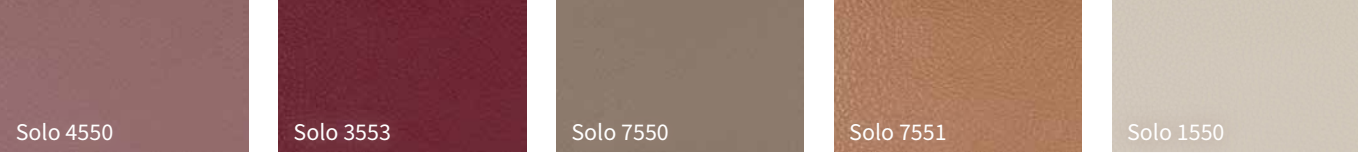

Surpiqûre losanges, tissu Ambra 1551

Des équipements utiles

Axés sur les besoins pour toutes les exigences

Toute la famille de lits Elvido peut être complétée individuellement par des options et accessoires pour répondre aux besoins. Vous pouvez voir sur les pages suivantes une sélection de caractéristiques d'équipement et d'options appropriées qui facilitent les soins quotidiens et offrent plus de confort au résident.

Caches du châssis en option

La variante de modèle Elvido vervo est équipée de série de 4 couvercles en plastique sur les coins du châssis. Ils recouvrent quelques caractéristiques techniques et sont assortis au châssis avec leur coloris gris argenté. Un couvercle encore plus complet est disponible sur demande. Les deux éléments en plastique recouvrent tout le côté front du châssis et sont disponibles dans les couleurs de nombreux décors en bois. Le lit obtient ainsi une apparence personnelle particulière.



▲ Par défaut, 4 caches en plastique recouvrent les extrémités des entretoises longitudinales.




▲ Le cache optionnel est adapté à la couleur décorative du lit.

CLAIREMENT MEILLEUR


Une sélection de couleurs attrayantes

	Chêne Lindberg
	Chêne style cannelle
	Havane cerise
	Hêtre naturel
	Craie
	Argenté

Sommiers

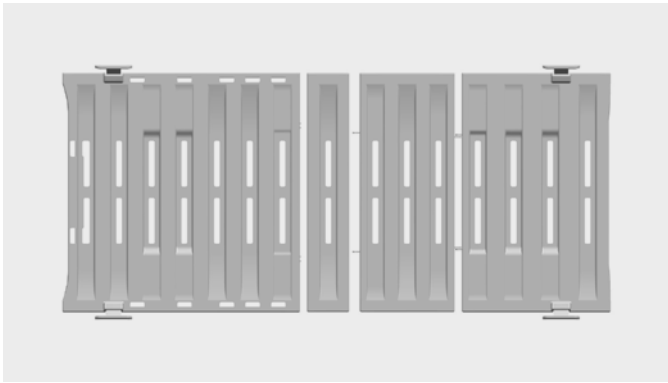

▲ Le sommier hygiénique de série – pour un microclimat sain et une préparation minutieuse.

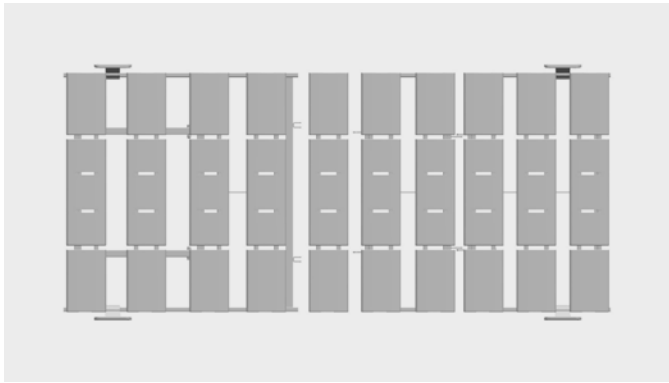

▲ Le sommier confortable en option – éléments de superficie supportés de manière flexible avec ressorts basculants

Galets déflecteurs



▲ Le galet déflecteur protège le lit et les murs lors des déplacements horizontaux et verticaux.

Écarteur de mur



▲ L'écarteur de mur protège le lit, les murs et le mobilier des dommages dus aux collisions.

Housses de protection et coussins de protection



◀ Les revêtements de protection pour panneaux, systèmes de protection et le poteau central protègent les résidents de blessures dans le cas où ils s'y cogneraient. Cela leur empêche également de passer la main entre les barreaux du système de protection.



▲ Les éléments des systèmes de protection à barreaux discontinus peuvent être recouverts individuellement.



◀ La housse de protection pour le système de protection à barreaux continus peut être abaissée et relevée avec les barreaux.

Matelas de protection anti-chute



▲ Il est recommandé d'utiliser le matelas de protection anti-chute conçu en mousse composite d'une épaisseur de 3 cm pour une protection maximale contre les blessures par chute.

Potence



▲ La potence aide à trouver une position confortable dans le lit.

Équipements et options

Variante de modèle	Elvido vervo	Elvido movo	Elvido forto	Elvido rega
Dimensions et poids				
Dimensions extérieures (en fonction de l'encadrement en bois)	env. 100,3 x 211 cm	env. 100,3 x 211 cm	env. 110,3 x 211 cm	env. 100,3 x 211 cm
Sommier (dimensions du matelas)	90 x 200 cm ou 100 x 200 cm	90 x 200 cm ou 100 x 200 cm	100 x 200 cm	90 x 200 cm
Répartition du sommier (RB / partie assise / RC / RJA)	env. 85 / 15 / 40 / 60 cm	env. 85 / 15 / 40 / 60 cm	env. 85 / 15 / 40 / 60 cm	env. 71 / 15 / 41 / 61 cm
Compensation de la longueur du relève-buste	env. 10 cm	env. 10 cm	env. 10 cm	–
Charge de travail sûre	225 kg	225 kg	260 kg	225 kg
Passage sous le lit	env. 15 cm	env. 16 cm	env. 19 cm	env. 15 cm
Poids total	env. 140 kg	env. 140 kg	env. 150 kg	env. 150 kg
Moteurs				
Entièrement motorisé, 230 volts	✓	✓	✓	–
Concept de motorisation 24 volts avec transformateur externe	O	O	O	–
Composants électroniques				
Télécommande standard éclairée HB400 avec fonction Trendelenburg	✓	✓	✓	–
Télécommande LCD avec fonction Trendelenburg	O	O	O	–
Out-of-Bed smart	O	O	O	–
Systèmes de protection				
Système de protection à barreaux continus intégré Easy Click*	✓	✓	✓	✓
Système de protection combinable intégré Easy Click*	O	O	O	O
Système de protection à barreaux discontinus avec Vario Safe	O	O	O	–
Cache latéral sans système de protection	O	O	O	O
Sommiers				
Sommier hygiénique (polypropylène, amovible avec réceptacle pour sangle de fixation)	✓	✓	✓	–
Sommier confort (pas pour le sommier 100 cm)	O	O	–	–
Largeur du sommier 100 cm	O	O	✓	–
Sommier à grille métallique	–	–	–	✓
Rallonge du lit 10 ou 20 cm	✓ intégrée	✓ intégrée	✓ intégrée	O vissable
Roulettes				
Roulette double	✓ Ø 50 mm	✓ Ø 100 mm	✓ Ø 125 mm	✓ Ø 50 mm
Frein de roulettes 2x2	✓	–	–	–
4 roulettes à frein centralisé	O	✓	✓	✓
Systèmes de déflecteurs muraux				
Galets déflecteurs à action horizontale	O	O	O	O
Roulette universelle à action horizontale et verticale	O	O	O	O
Écarteurs de mur sur le châssis	O	O	O	O
Plages de réglage				
Réglage de la hauteur	env. 25 - 80 cm	env. 28 - 83 cm	env. 30 - 85 cm	env. 39 - 80 cm
Réglage du relève-buste jusqu'à 70°	✓	✓	✓	✓
Ajustage relève-cuisses jusqu'à 40°	✓	✓	✓	✓
Position proclive	✓ jusqu'à 12°	✓ jusqu'à 12°	✓ jusqu'à 12°	O jusqu'à 10°
Position décline	✓ jusqu'à 12°	✓ jusqu'à 12°	✓ jusqu'à 12°	O jusqu'à 14°

*avec cache latéral, seulement avec les panneaux de pied hauts

Variante de modèle	Elvido vervo	Elvido movo	Elvido forto	Elvido rega
Équipement supplémentaire				
Éclairage sous le lit	O	O	O	–
Rallonge de lit intégrée avec barreaux de sécurité télescopiques et cache latéral	O	O	O	–
Porte-literie	O	O	O	O
Raccord de lampe intégré	O	O	O	–
Batterie intégrée	O	O	O	–

CLAIREMENT MEILLEUR

Série Elvido – les normes de sécurité

- EN 14971
Analyse des risques pour dispositifs médicaux
- EN 60601-1
Sécurité pour appareils médicaux électriques
- EN 60601-1-1
Compatibilité électromagnétique
- DIN EN 60601-2-52
Appareils électromédicaux



✓ = Équipement standard
O = En option
– = Non disponible



Service technique

Nos prestations - adaptées à vos exigences

Les lits hospitaliers et de soins de grande qualité du groupe Stiegmeyer sont accompagnés d'un service tout aussi qualitatif. Notre portefeuille de prestations comprend les activités clés que sont le contrôle, la remise en état, la formation et le conseil.

Nous suivons ici complètement les souhaits et les exigences de votre société. Peu importe comment vous souhaitez nous contacter, plusieurs choix s'offrent à vous. Les interlocuteurs personnels au téléphone vous aident pour commander les pièces de rechange et vous offrent un support technique complet. Plus de 50 collaborateurs du service technique se chargent sur site chez les clients des contrôles et des remises en état.

Notre service prend en charge tous les produits Stiegmeyer avec des pièces de rechange, même jusqu'à 15 ans après l'achat. À Herford, Stiegmeyer exploite un centre de service ultramoderne possédant une surface de stockage de 3 000 mètres carrés. Dans cet entrepôt automatisé se trouvent 7 500 articles en moyenne qui peuvent être expédiés dans toute l'Allemagne dans des délais généralement brefs. Vous pouvez aussi commander ces articles confortablement en ligne, sur notre portail de service :

<https://service.stiegmeyer.com>



+49 5221 185 777
Lun.-jeu. de 8h à 16h30
Ven. de 8h à 14h



service@stiegmeyer.com

Pièces de rechange

Les clients peuvent commander à tout moment des pièces de rechange depuis notre portail de service. Les listes de favoris personnalisées ainsi que la consultation de tous les documents importants et le suivi des livraisons par Track & Trace garantissent confort et transparence. Il est possible de planifier à l'avance la gestion des lits dans l'établissement.

Contrôle des lits

Le contrôle des lits peut prendre la forme d'une inspection ou d'une maintenance. Lors de l'inspection, nous évaluons l'état technique du lit. Cela permet de déduire les mesures adéquates pour chaque lit. En plus de ces prestations, la maintenance englobe des mesures de remise en état préventives – par exemple l'ajustage des freins. La maintenance consiste à maintenir l'état de consigne. L'inspection et la maintenance englobent toujours les prescriptions spécifiques à chaque pays ainsi qu'un rapport de service que vous pouvez aussi consulter en ligne.

Réparation rapide du lit

En tant que fabricant, nous garantissons la livraison de pièces de rechange d'origine en un temps record. Nos collaborateurs réparent les dommages sur vos lits de manière rapide, compétente et avec un très bon rapport qualité-prix. Les remises en état particulières, les modifications ou les rénovations complètes sont effectuées dans notre centre de service à Herford.

STIEGMEYERGROUP



Solutions for people who care

Le groupe Stiegmeyer est le principal fabricant allemand de lits médicaux pour les hôpitaux, les établissements de soins et les soins à domicile. Avec ses tables de nuit, meubles et systèmes d'assistance numériques modernes, il est aussi un fournisseur innovant de solutions globales. L'entreprise familiale développe avec succès des offres pour les marchés internationaux dans plus de 100 pays.

Nos points forts :

- Le développement des produits dans notre siège à Herford, en Allemagne – la production dans quatre usines modernes en Allemagne et en Pologne
- La fabrication en Chine pour le marché chinois
- Des filiales et partenaires de distribution dans de nombreux pays
- Un service de premier ordre avec une livraison fiable des pièces de rechange
- Des formations et optimisations des processus pour nos clients
- Une action durable avec un fort engagement social

Notre expertise

- Hôpital
- Long séjour
- Soins à domicile
- Lits exclusifs
- Mobilier
- Service

Nos valeurs

- Expérience
- Humain
- Fiabilité
- Ciblé sur les solutions
- Ouverture
- Confiance

1 000
COLLABORA-
TEURS DANS
LE MONDE
ENTIER

11
SITES
en Allemagne, en Pologne,
aux Pays-Bas, en Belgique,
en France, en Finlande, en
Afrique du Sud et en Chine

Des OFFRES
sur mesure
pour tous les
MARCHÉS

PLUS DE
100 000 lits
produits
par an

JUSQU'À
15 ANS
de livraisons de
pièces détachées

DISTRIBUTION
dans plus de
100 pays

CERTIFI-
CATIONS
internationales

INGÉNIERIE
ALLEMANDE

STIEGMEYER

Nos marques

BURMEIER



STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Siège / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Siège / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr


South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn

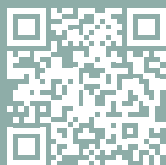

stieglmeyer-group.com

Tous les produits et toutes les configurations ne sont pas disponibles dans chaque pays. Not all products and configurations are available in every country.
Sous réserve de modifications techniques. Les légères différences de couleurs par rapport aux originaux résultent de la technique typographique.
Edition 01/2024. Version 17c. Réf. 601294.
Subject to technical changes without notice. The shown product colours may differ slightly from the actual product. Last updated 01/2024. Version 17c. Item no. 601294.