



Libra

Les lits surbaissés pour les soins modernes

Libra :

Le lit surbaissé pour plus de mobilité, de sécurité et de confort



Le nombre de personnes nécessitant des soins et notamment la proportion de personnes souffrant de démence va considérablement augmenter au cours de ces prochaines années. D’ici 2030, l’Organisation mondiale de la santé s’attend à une augmentation de 40 % des cas de démence par rapport au début de la décennie. Un bon lit de soins doit aider à relever ce défi. Et c’est là qu’entre en jeu la gamme de lits Libra.

La position surbaissée du sommier ainsi que les systèmes de protection intelligents à barreaux discontinus réduisent le risque de chute tout en garantissant une grande liberté de mouvement. Grâce à leur conception modulaire, les lits s’adaptent en continu aux exigences des résidents.

[Accéder ici à la vidéo Libra :](#)



[Accéder ici à la vidéo Libra-partner :](#)



CLAIREMENT MEILLEUR

Libra – Les normes de sécurité

- EN 14971 – Analyse des risques pour dispositifs médicaux
- EN 60601-1 – Sécurité pour appareils médicaux électriques
- EN 60601-1-1 – Compatibilité électromagnétique
- DIN EN 60601-2-52 – Appareils électromédicaux



Libra Standard

- réglage de la hauteur : env. 25 – 80 cm
- charge de travail sûre élevée de 225 kg
- lit surbaissé pour la prévention des chutes : protection sans mesures de privation de la liberté
- formes, décors et variantes de rembourrage attrayants



Libra – Variante movo

- réglage de la hauteur : env. 28 – 83 cm
- charge de travail sûre élevée de 225 kg
- propriétés de déplacement améliorées : manœuvres facilitées dans les pièces étroites
- les résidents participent plus facilement à la vie quotidienne

Table des matières

Libra Standard	
• Conception sur mesure adaptable à toutes les exigences	4
Libra – Variante movo	
• Excellentes propriétés de déplacement pour un quotidien dynamique	6
Libra – Variante espace au sol Plus	
• Bâti sans contact avec le sol pour une hygiène optimale	7
Libra partner	
• Le lit double qui permet aux personnes âgées de dormir côte à côte	8
Systèmes de protection	10
• Système Vario Safe	12
• Système Easy-Click	14
Confort et sommiers	15
Possibilités de positions médicales	16
• Aide pour la guérison et la prévention	16
Commande	
• Des télécommandes pour des exigences individuelles	17
Ergonomie et mobilisation	
• Prévenir efficacement les problèmes de dos	18
• Soulagement du personnel soignant au quotidien	19
• Rallonge de lit	20
Facile d’entretien	
• Système 24 volts	21
Design	
• Panneaux et décors	22
• Panneaux de tête et de pied	22
• Tissus et cuirs synthétiques	23
• Rembourrages	23
Des équipements utiles	
• Plus de sécurité et de confort	24
Service technique	
• Pièces de rechange, contrôle des lits, entretien	25
Équipements et options	26
Le groupe Stiegemeyer	27



Libra – Variante espace au sol Plus

- réglage de la hauteur : env. 25 – 80 cm
- charge de travail sûre élevée de 225 kg
- châssis sans entretoises longitudinales : accès libre sous le lit
- meilleure hygiène grâce au nettoyage simplifié du sol



Libra partner

- réglage de la hauteur : env. 25 – 80 cm
- charge de travail sûre élevée de 2 x 225 kg
- lit double flexible : dormir ensemble ou séparément
- sécurité élevée grâce au mouvement synchronisé du corps de lit



Vario Safe Libra Standard

Conception sur mesure adaptable à toutes les exigences



La variante standard du Libra est un lit surbaissé avec des systèmes de protection à barreaux discontinus disponibles en option qui offre à la fois sécurité élevée et grande liberté de mouvement. Sa position surbaissée près du sol d'environ 25 cm réduit le risque de chutes alors que le système de protection à barreaux discontinus relevé côté tête laisse suffisamment de place pour monter et descendre du lit.

- grande plage de réglage de la hauteur d'env. 25 - 80 cm pour la prévention des chutes et soulager le dos pendant les soins
- charge de travail sûre élevée de 225 kg
- systèmes de protection à barreaux discontinus disponibles en option pour une protection individuelle dans chaque situation
- retrait sans outil de tous les systèmes de protection avec système Vario Safe ou Easy-Click
- aspect cosy grâce au choix de panneaux, décors en bois et rembourrages



- ▲ La position surbaissée du sommier de 25 cm permet de réduire les conséquences des chutes.
- ◀ Le système Vario Safe flexible permet de combiner à titre individuel les éléments du système de protection, les caches et les panneaux.

Dimensions extérieures/plage de réglage de la

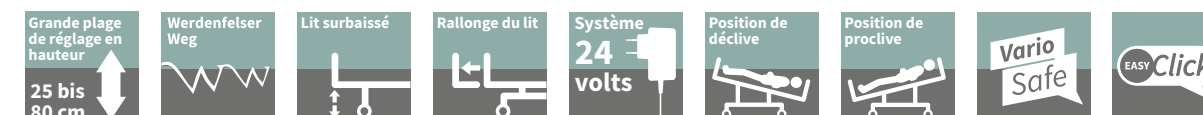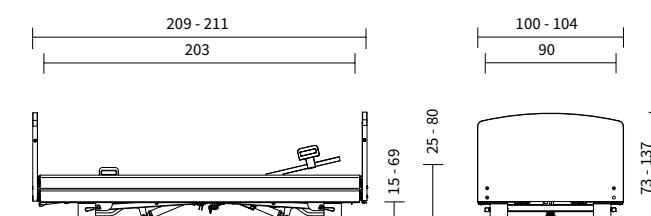



Participez à nouveau à la vie quotidienne avec la variante de modèle movo.

**Vario
Safe**




Libra – Variante movo

Excellentes propriétés de déplacement pour un quotidien

La variante movo du Libra vous convaincra par ses excellentes propriétés de déplacement. Cette variante simplifie considérablement les manœuvres dans des pièces étroites ou des chambres à plusieurs lits et les transports d'un endroit à un autre dans la maison. Cela soulage les soignants et les techniciens et réduit le risque de dommages par collision. Les excellentes propriétés de déplacement de la variante movo permettent aux personnes alitées de participer à la vie quotidienne – vous pouvez simplement déplacer le lit dans les pièces communes ou sur la terrasse sans le moindre effort.

- **roulettes doubles de 100 mm** avec d'excellentes propriétés de déplacement
- **blocage centralisé des roulettes** par défaut
- **grande plage de réglage de la hauteur** d'env. 28 – 83 cm

Dimensions extérieures/plage de réglage de la hauteur :

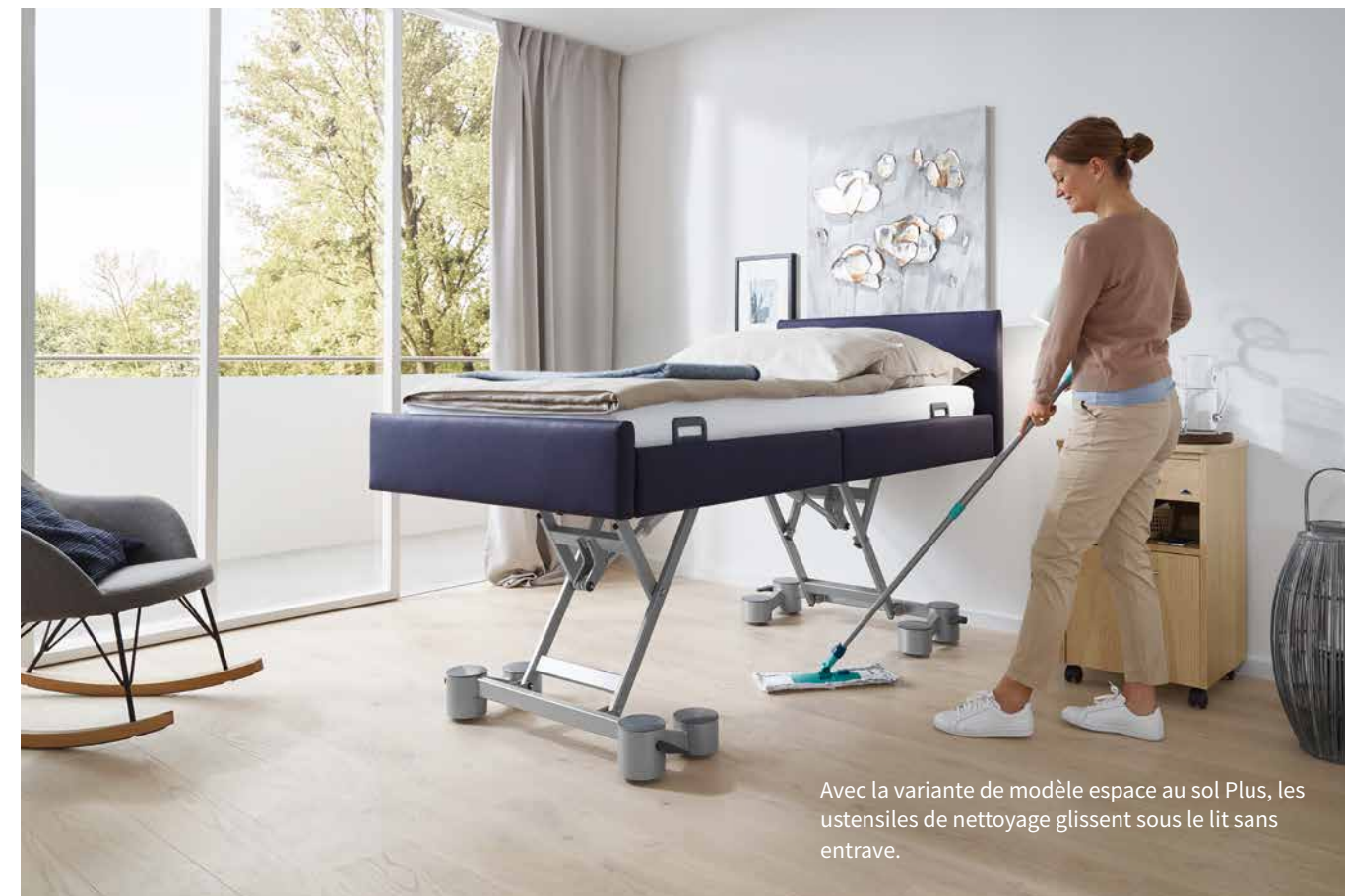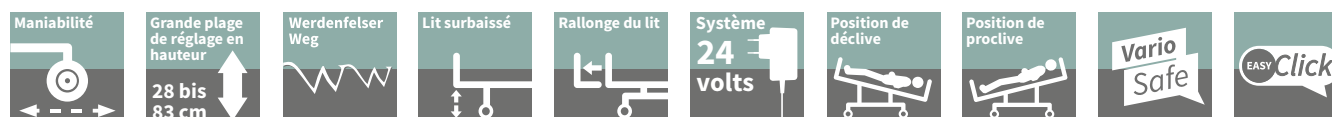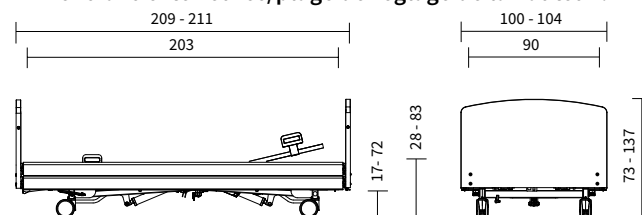

Avec la variante de modèle espace au sol Plus, les ustensiles de nettoyage glissent sous le lit sans entrave.

**Vario
Safe**


Libra – Variante espace au sol Plus

Aucun contact avec le sol pour une hygiène optimale


Une hygiène sûre et parfaite est essentielle dans les soins stationnaires afin de combattre les pathogènes et les allergies tout en créant une atmosphère confortable. C'est pourquoi la saleté et la poussière n'ont pas leur place sous le lit. La variante de modèle espace au sol Plus est formée d'un châssis particulièrement épuré sans entretoises métalliques sur les côtés du lit. Cela simplifie le nettoyage en profondeur du sol – les ustensiles de nettoyage glissent sous le lit sans entrave.

- grande plage de réglage de la hauteur d'env. 25 – 80 cm
- accès libre sous le lit optimal pour les lève-personnes
- Les 8 roulettes assurent une bonne maniabilité ainsi qu'une stabilité suffisante

Dimensions extérieures/plage de réglage de la hauteur :

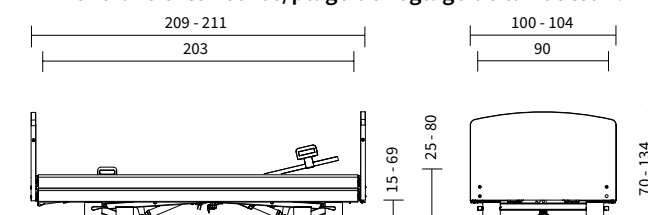

▲ Le lit est très maniable grâce à ses 8 roulettes.

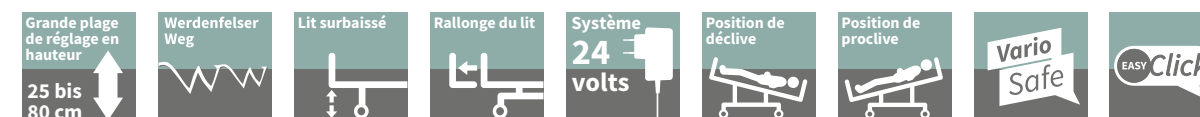



Avec le Libra partner, les couples profitent d'un nouveau confort de vie dans les établissements de soins.



Libra partner

Le lit double qui permet aux personnes âgées de dormir côte à côte

Lorsque les couples arrivent dans un établissement de soins ou lorsque des liens s'y créent, se pose la question du lit commun ou non. Avec le Libra partner, vous avez une solution flexible pour chaque situation. De la même manière que les lits simples Libra, le lit double répond à la perfection à toutes les exigences en termes de soins. En outre, les deux côtés du lit peuvent être séparés en toute facilité et être placés par ex. le long de murs opposés. Il est ainsi possible de prendre en compte les désirs du couple tout comme les indications médicales qui suggèrent une séparation physique pendant la nuit.

- grande plage de réglage de la hauteur d'env. 25 – 80 cm
- charge de travail sûre élevée de 225 kg par sommier
- système de protection à barreaux discontinus avec système Vario Safe

Dimensions extérieures/plage de réglage de la hauteur :

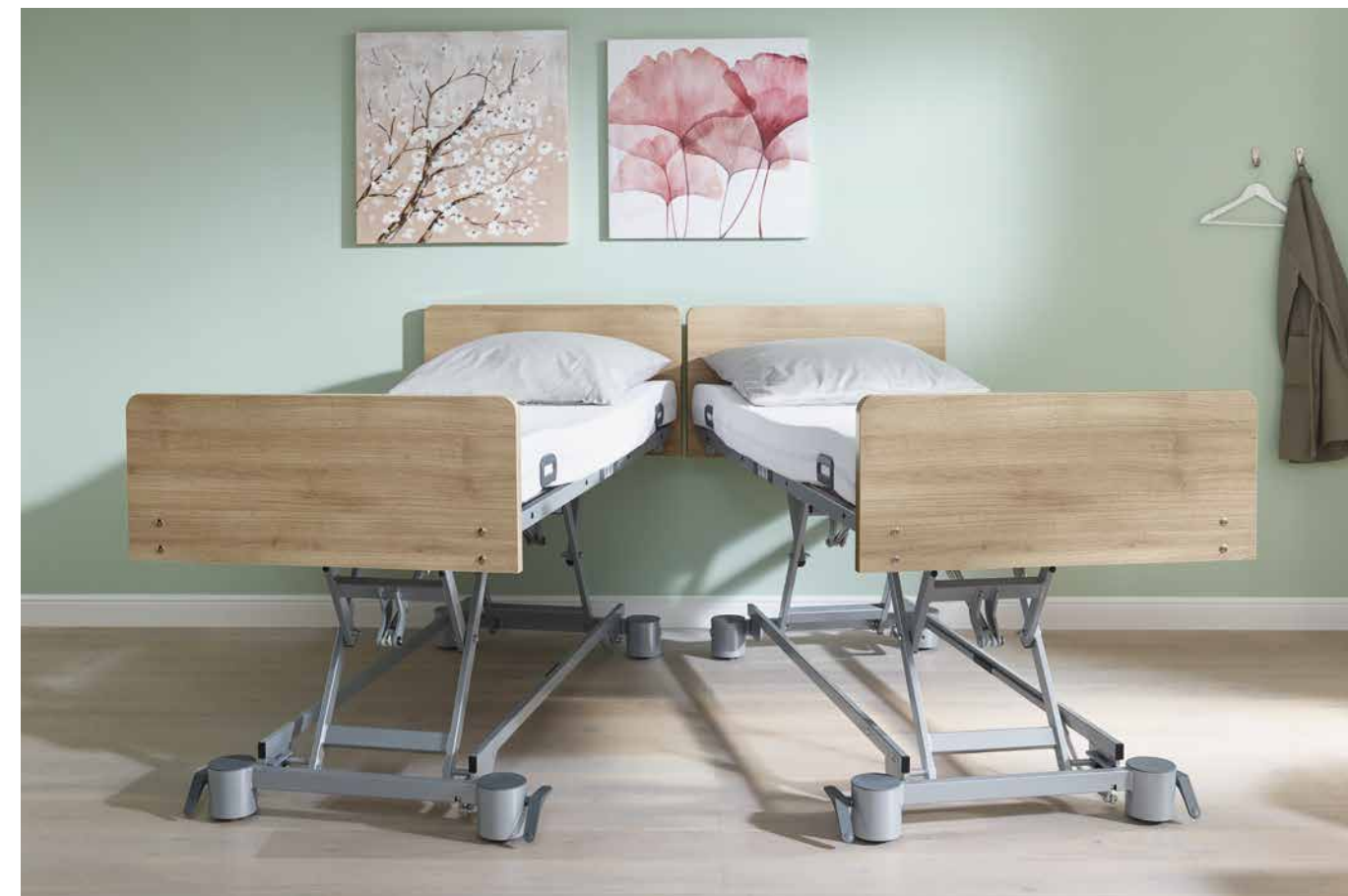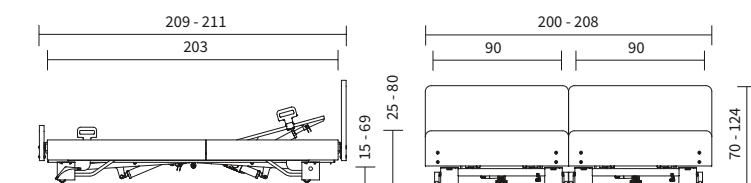

Confort et sécurité associés de manière judicieuse

Lors de la conception du Libra partner, nous avons accordé une grande importance au confort de chaque partenaire tout comme à une protection optimale. Il est possible de régler individuellement le relèvement-buste et le relèvement-jambes des deux sommiers permettant par ex. à un partenaire de poursuivre sa lecture tandis que l'autre dort déjà. Chaque moitié de lit dispose pour cela d'une propre télécommande.

Les sommiers se déplacent toujours de manière synchronisée pour le réglage de la hauteur et le pivotement. Cela permet d'éviter tout espace libre entre les sommiers pouvant créer des zones de coincement pour les résidents.

- ▲ Il est possible de séparer et d'assembler de nouveau les deux moitiés du lit en toute facilité. Cela permet également de procéder aux soins depuis les deux côtés du lit.



- ▲ Chaque sommier dispose de sa propre télécommande.

CLAIREMENT MEILLEUR La position assise

Les lits doubles à réglage électrique sont souvent des lits simples juxtaposés avec des fonctionnalités limitées. Le Libra partner est l'un des rares modèles à séduire par son pivotement en position assise pour un confort optimal. Cela favorise la respiration, facilite les repas pris au lit et permet aux résidents de participer à la vie quotidienne à hauteur des yeux.



« Les lits de soins doivent s'adapter rapidement aux besoins du moment en termes de soins. »

Marco Leone,
Prestation de soins



LA SOLUTION STIEGELMEYER

Trois systèmes de protection au choix



- Système de protection à barreaux discontinus avec Vario Safe
- Cache confortable avec Vario Safe



- Système de protection à barreaux continus Easy Click
- Système de protection combiné Easy Click



Vario
Safe



EASY
Click

Systèmes de protection

Équilibre optimal entre protection et liberté

Les personnes nécessitant des soins ont des besoins très différents en matière de protection, ces derniers pouvant également évoluer rapidement. Avec ses trois systèmes de protection au choix, le Libra offre une solution flexible dans chaque situation.

Le système de protection à barreaux discontinus utilisé avec le système Vario Safe peut être retiré et remplacé sans outil. Il est possible ainsi de l'adapter rapidement à chaque résident.

Le système de protection combinable à barreaux discontinus est doté d'un poteau central faisant également office d'aide au redressement pour le résident. Grâce au système Easy-Click très pratique, les barreaux sont aussi faciles à retirer que ceux du système de protection à barreaux continus pour une protection maximale.



- ▲ Le système de protection à barreaux discontinus peut être combiné avec des caches confortables.



- ▲ Le système de protection à barreaux continus assure une protection optimale.



- ▲ Les 4 éléments du système de protection à barreaux discontinus peuvent être déployés individuellement vers le haut sur 2 niveaux.




- ▲ L'élément côté tête et le poteau central du système de protection combinable offrent une protection conforme aux normes.



CLAIREMENT MEILLEUR
Sécurité garantie
contre les écrasements


- Un mécanisme de sécurité présent sur le système de protection empêche le sommier d'écraser ou d'endommager les pieds, les plinthes ou les objets placés près du lit lorsque le sommier est abaissé. En cas de collision, le système de protection remonte.
- Respect de la norme EN 60601-2-52.

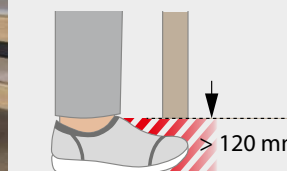



Vario Safe – le système pour les exigences changeantes

La construction modulaire ouvre de nouvelles possibilités

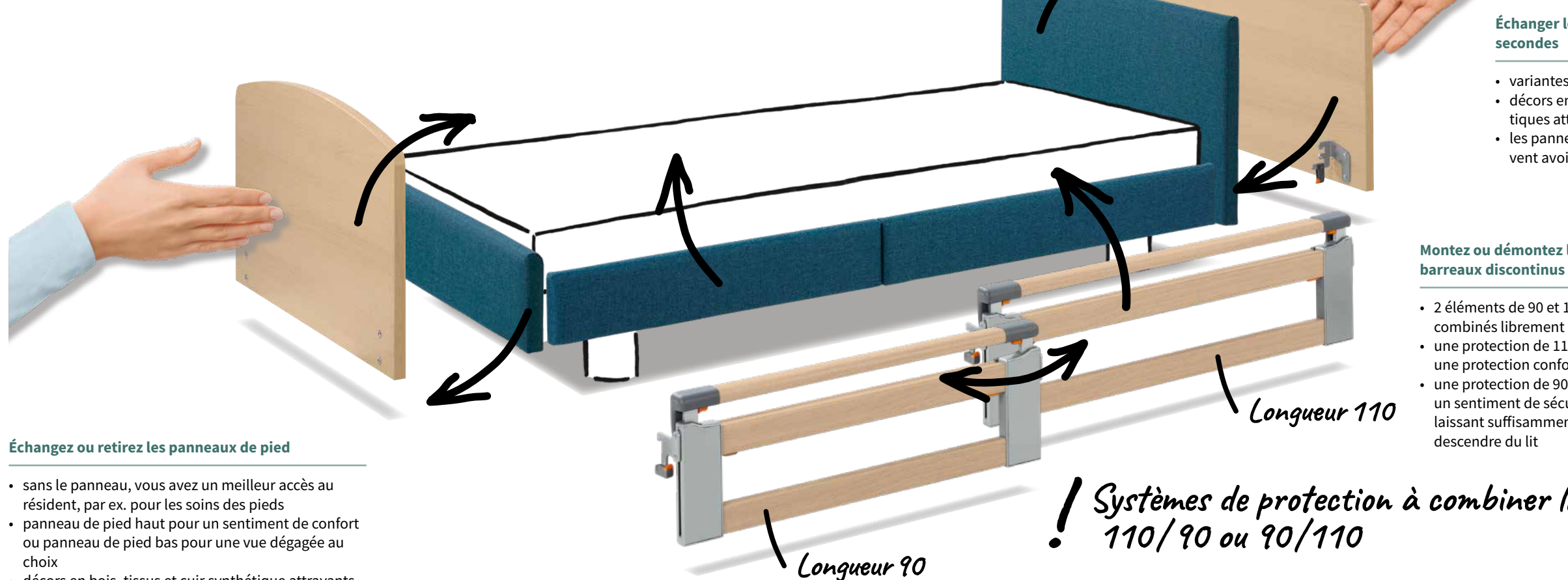

Échangez ou retirez les panneaux de pied

- sans le panneau, vous avez un meilleur accès au résident, par ex. pour les soins des pieds
- panneau de pied haut pour un sentiment de confort ou panneau de pied bas pour une vue dégagée au choix
- décors en bois, tissus et cuir synthétique attrayants au choix

Systèmes de protection à barreaux discontinus télescopiques sur deux niveaux

- système de protection à barreaux discontinus télescopique vers le haut sur deux niveaux ou relevable en diagonale
- une protection maximale ou une aide à l'orientation discrète
- un déclenchement sans effort avec les touches ergonomiques

Échanger le panneau de tête en quelques secondes

- variantes cosy avec ou sans poignées
- décors en bois, tissus et cuirs synthétiques attrayants au choix
- les panneaux et les caches latéraux peuvent avoir des couleurs différentes

Montez ou démontez les systèmes de protection à barreaux discontinus en cas de besoin

- 2 éléments de 90 et 110 cm de long peuvent être combinés librement ou utilisés individuellement
- une protection de 110 cm installée côté tête offre une protection conforme aux normes
- une protection de 90 cm installée côté tête offre un sentiment de sécurité et d'orientation tout en laissant suffisamment de place pour monter et descendre du lit

! Systèmes de protection à combiner librement : 110/90 ou 90/110



Accéder ici à la vidéo Vario Safe

Le système Vario Safe est l'option idéale lorsque vous souhaitez équiper votre lit Libra ou Libra partner avec des systèmes de protection à barreaux discontinus ou des caches latéraux. Avec Vario Safe, il est possible de retirer et de remplacer sans outil tous les éléments de l'encadrement de lit. Cela est rendu possible grâce aux attaches brevetées.

Si un nouveau résident a d'autres besoins en matière de protection ou des préférences individuelles, les systèmes de protection peuvent être réduits et les panneaux de tête et de pied peuvent être remplacés en un temps record. Cela permet de soulager le service technique et de faire des économies, car l'établissement de soins peut équiper de nombreux lits sur mesure grâce à un stock limité d'éléments.

CLAIREMENT MEILLEUR

Protection conforme aux normes

- Pour un sommier long de 200 cm, le système de protection à barreaux discontinus sur chaque côté consiste en un élément de 110 cm et un élément de 90 cm.
- Ces éléments côté pied et tête peuvent être interchangeables.
- Si l'élément de 110 cm est installé côté tête, il recouvre plus de 50 % du sommier et correspond ainsi à lui seul à un système de protection conforme aux normes.
- L'élément de 90 cm seul n'offre pas de protection conforme aux normes, mais offre du soutien et suffisamment de place pour monter et descendre du lit.
- Si vous utilisez la rallonge du lit, vous pouvez monter deux éléments de 110 cm.

Vario Safe – un maniement sans outil avec une sécurité élevée



▲ Insérer l'élément Vario Safe dans le cadre du lit et le fixer avec les attaches.



▲ La protection garantit une pose du système de protection à la fois sûre et conforme aux normes.



Easy Click – une manipulation facile et une meilleure hygiène

Système de protection à barreaux continus et combinable au montage sans outil




Nouveau système de fixation pour système de protection combinable et à barreaux continus

Les résidents particulièrement susceptibles de tomber ont besoin d'une protection maximale – le système de protection à barreaux continus classique s'avère souvent être le meilleur choix dans ce cas. Si souhaité, il est possible de l'associer de l'autre côté avec le système de protection à barreaux discontinus combinable, ce qui offre un équilibre idéal entre sécurité et liberté. Le poteau central du système de protection combinable constitue en outre une aide solide pour la mobilisation.

La nouvelle génération de la série Libra comporte le système intelligent Easy-Click de série pour les deux systèmes de protection. Les barres peuvent ici être « clipsées » sans outils sur les supports prémontés. Cela facilite l'installation et le nettoyage du lit. Les capuchons en plastique élégants protègent l'intérieur des barres contre la saleté et les liquides. Avec le système Easy-Click également, les systèmes de protection peuvent être interchangeables entre plusieurs lits, pour plus de rentabilité.



▲ Easy Click permet de monter et de retirer les barres sans outil sur les supports prémontés.

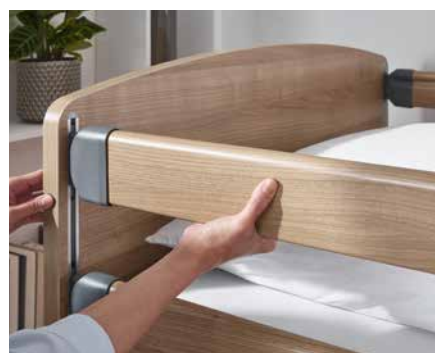

▲ Le déclenchement facile à manipuler sur les panneaux de tête et de pied permet d'abaisser les barres sans effort.



▲ Pour abaisser les barres du système de protection combinable, il suffit d'appuyer sur le bouton du poteau central. Le poteau lui-même peut être retiré et rangé dans un support sous le lit lorsqu'il n'est pas utilisé.



Grâce au relèvement-buste réglable, le quotidien est toujours confortable.

Confort et sommiers

Joie de vivre comme dans un hôtel de qualité

Le Libra présente toutes les qualités pour que les personnes dépendantes se sentent bien et en sécurité. La précision de réglage du lit constitue à ce titre un facteur déterminant. Être assis, regarder la télévision ou discuter à hauteur des yeux, en toute détente : avec le Libra, c'est possible. Grâce à la position de proclive jusqu'à 12° et au réglage du relèvement-buste jusqu'à 70°, le lit se transforme en un fauteuil confortable. Les résidents peuvent ainsi participer davantage à la vie quotidienne.



▲ Le sommier à lamelles métalliques en 4 parties du Libra est à la fois stable et flexible et se nettoie de façon optimale. Les différentes possibilités de réglage du relèvement-buste et du relèvement-cuisses permettent de choisir la position souhaitée par le résident dans toutes les situations quotidiennes. Le confort et l'hygiène du sommier peuvent en outre être améliorés au moyen de caches disponibles en option.



▲ Le sommier tout confort se compose de 50 éléments à ressort distincts. Ceux-ci épousent parfaitement le corps et favorisent une bonne ventilation du matelas. Leurs mouvements d'oscillation assurent une répartition optimale des pressions.



▲ Avec ses fentes d'aération intégrées, le sommier hygiénique en plastique résistant est particulièrement respirant. Amovible, il se nettoie simplement à l'aide de produits d'entretien courants.

« Nos résidents nécessitant des soins doivent pouvoir mener une vie à hauteur des yeux. »

Marco Leone,
Prestation de soins



LA SOLUTION STIEGELMEYER


Des possibilités de réglages pour de nombreuses indications

- sommier divisé en 4 avec réglage électrique
- corps du lit pivotant pour la position de déclive, de proclive et une position assise confortable
- favorisation de la respiration et de la circulation


Possibilités de positions médicales

Aide pour la guérison et la prévention


Les possibilités de réglage confortables du Libra améliorent à long terme la santé des résidents et aident les soignants dans leur travail. Par exemple, le sommier flexible permet une position de proclive pour la prévention des aspirations et pneumonies, tandis que la position Cardiac Chair soulage le cœur. La position de déclive et la position jambes hautes inclinées sont disponibles pour lutter contre les chocs et soulager les veines.

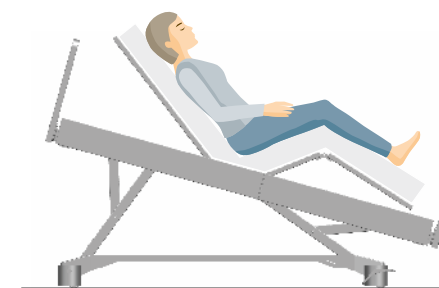


▲ La position Cardiac Chair soulage le cœur et renforce la circulation.

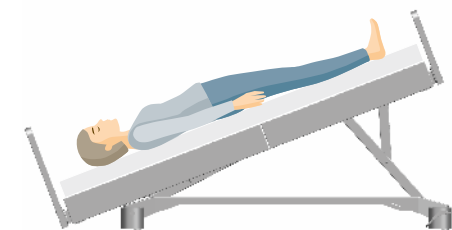

▲ La position de déclive peut atténuer les conséquences d'un choc.

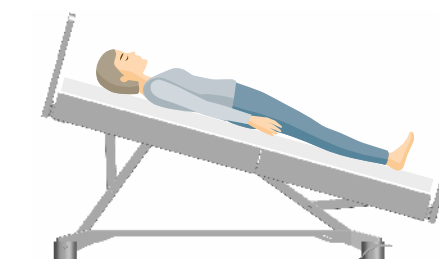

▲ Le degré de pivotement du corps du lit permet une position de proclive pour faciliter la déglutition et prévenir les aspirations, par exemple.

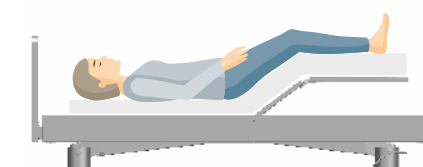

▲ Le réglage du relève-jambes jusqu'à env. 22° sert à soulager et à réduire la douleur.

Utilisation sans aucun effort

Des télécommandes pour des exigences individuelles

La télécommande assure une sélection facile et intuitive de tous les réglages possibles du Libra. Elle est légère et conçue de manière ergonomique. Elle est dotée de grandes touches fléchées et de symboles clairs afin que même les résidents ayant des capacités réduites puissent l'utiliser. Elle permet en outre un verrouillage sélectif des différentes fonctions. La télécommande Trendelenburg disponible à part est utilisée pour régler la position de déclive du lit, celle-ci écartant tout risque que le résident actionne ce réglage par erreur.



▲ Télécommande Trendelenburg



▲ Télécommande éclairée (disponible en option)

◀ Télécommande Libra

« J'attache une grande importance à un travail préservant le dos afin que mon équipe soit en forme et dans le but de réduire les absences pour maladie. »

Marco Leone,
Prestation de soins



LA SOLUTION STIEGELMEYER

Prévenir efficacement les problèmes de dos

- très grande plage de réglage de la hauteur d'env. 25 à 83 cm selon la variante de modèle
- accès facile aux personnes nécessitant des soins
- soulagement grâce à la mobilisation autonome du résident




Ergonomie et mobilisation

Soulagement du personnel soignant au quotidien


Les maux de dos constituent l'un des principaux problèmes dans les métiers des soins – jusqu'à deux tiers du personnel soignant en souffre selon les sondages. Il est d'autant plus important d'avoir la possibilité de travailler dans une position droite qui soulage le dos dans de nombreuses situations. La position la plus élevée des lits Libra supérieure à 80 cm y contribue, tout en permettant un accès facile au résident grâce aux éléments modulaires amovibles. Les nombreuses aides à la mobilisation de la construction offrent en outre au résident la possibilité de se lever plus facilement, sans aide extérieure.



Hauteurs de réglage du lit

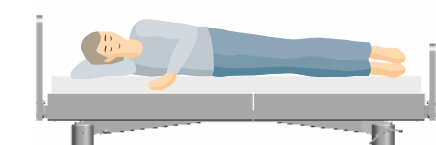

- ▲ Position basse d'env. 25 cm afin d'éviter les blessures par chute.

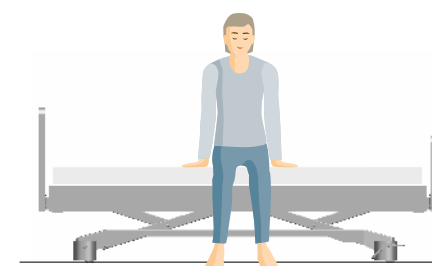

- ▲ Avec le réglage individuel du sommier, les résidents peuvent se lever de manière autonome avec beaucoup plus de facilité. Le lit effectue automatiquement un arrêt intermédiaire à 38 cm, hauteur idéale pour se lever.



- ▲ La position la plus élevée se situe, selon le modèle, entre 80 et 83 cm – idéale pour travailler à hauteur des hanches, en soulageant son dos.



- ▲ Avec le système Vario Safe, les panneaux de tête et de pied peuvent être retirés sans outils. Soulagement du personnel soignant lors des soins corporels, de la physiothérapie et des soins lourds.

Rallonge de lit

Davantage d'espace pour les résidents de grande taille

Cela fait de nombreuses décennies que les personnes sont en moyenne de plus en plus grandes et les établissements de soins doivent également s'y adapter. Grâce à la rallonge de lit optimale pour le Libra, offrez aux résidents la place dont ils ont besoin. Vous pouvez configurer un lit plus long d'environ 20 cm lors de l'achat, ou bien commander la rallonge de lit par la suite.

L'élément métallique servant à rallonger le cadre du lit s'insère simplement du côté pieds. Des barreaux et caches plus longs ou des éléments de remplissage pour caches sont disponibles pour tous les types de système de protection. Si le lit est équipé du système de protection à barreaux discontinus avec le système Vario Safe, il est possible d'équiper chaque côté du lit avec deux éléments de 110 cm de long ou avec un système de protection de 90 cm de long et un cache de 130 cm de long. Avec Vario Safe, l'utilisation de la rallonge de lit dans l'établissement est encore plus flexible – tous les éléments requis peuvent être transférés d'un lit à l'autre en quelques instants.




Pour rallonger le matelas, Stiegmeyer propose une partie matelassée confortable correspondante.



▲ L'élément de rallonge du lit s'insère simplement dans le cadre du lit.



▲ Une partie matelassée sur mesure est disponible pour rallonger le matelas.

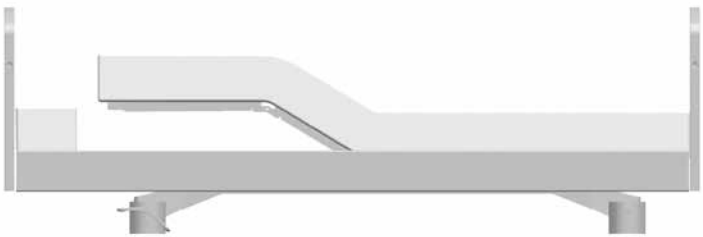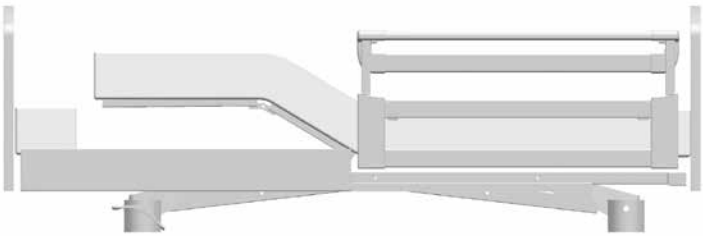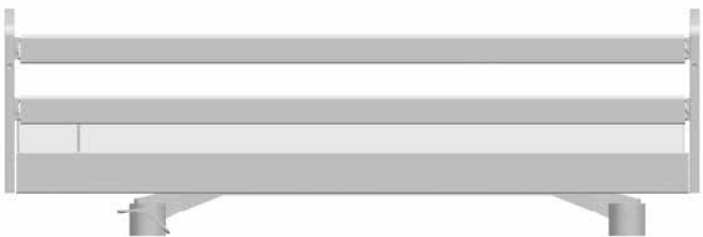

◀ En cas d'utilisation de la rallonge de lit avec le système Easy-Click, il est possible de choisir des barres du système de protection plus longues et des éléments de remplissage pour les caches latéraux.

◀ Si la rallonge de lit est utilisée avec le système Vario Safe, il est possible de remplacer les systèmes de protection ou caches de 90 cm de long par des versions de 110 cm de long, le tout sans outils.

◀ Une partie matelassée confortable est disponible pour rallonger le matelas. Celle-ci reste toujours parfaitement en place.

Facile d'entretien

grâce au système 24 Volts

Sécurité élevée, optimisation des coûts et une utilisation en toute simplicité : le système 24 Volts est l'entraînement idéal pour tous les lits Libra.


La conversion de la tension se fait directement au niveau de la prise de courant. Aucun composant sous tension de 230 volts ne se trouve à proximité de la personne nécessitant des soins qui bénéficie, ainsi, de plus de sécurité.

Les mesures et les contrôles spécifiques à chaque pays sont réduits grâce à un système à la maintenance réduite.



▲ Un transformateur de fiche secteur génère une basse tension de protection directement au niveau de la prise.

CLAIREMENT MEILLEUR Des avantages

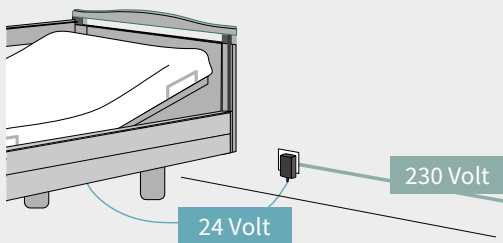

- Basse tension de protection à partir du transformateur sur la prise
- Aucun composant de 230 volts sur le lit
- Batterie disponible en option pour rendre le lit de soins indépendant du secteur en cas d'urgence

CLAIREMENT MEILLEUR Utilisable partout




Nous offrons des fiches secteur compatibles sur de nombreux marchés internationaux. Utilisez notre système 24 volts à tout moment sans adaptateur.

Design

Panneaux et décors

La série Libra bénéficie d'un grand nombre de panneaux de tête et de pied cosy, disponibles avec et sans poignée. Faites aussi votre choix parmi les douze décors en bois actuels – du ton craie blanc au décor Hêtre Crenata moderne avec ses veines marquées. Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour vous conseiller.

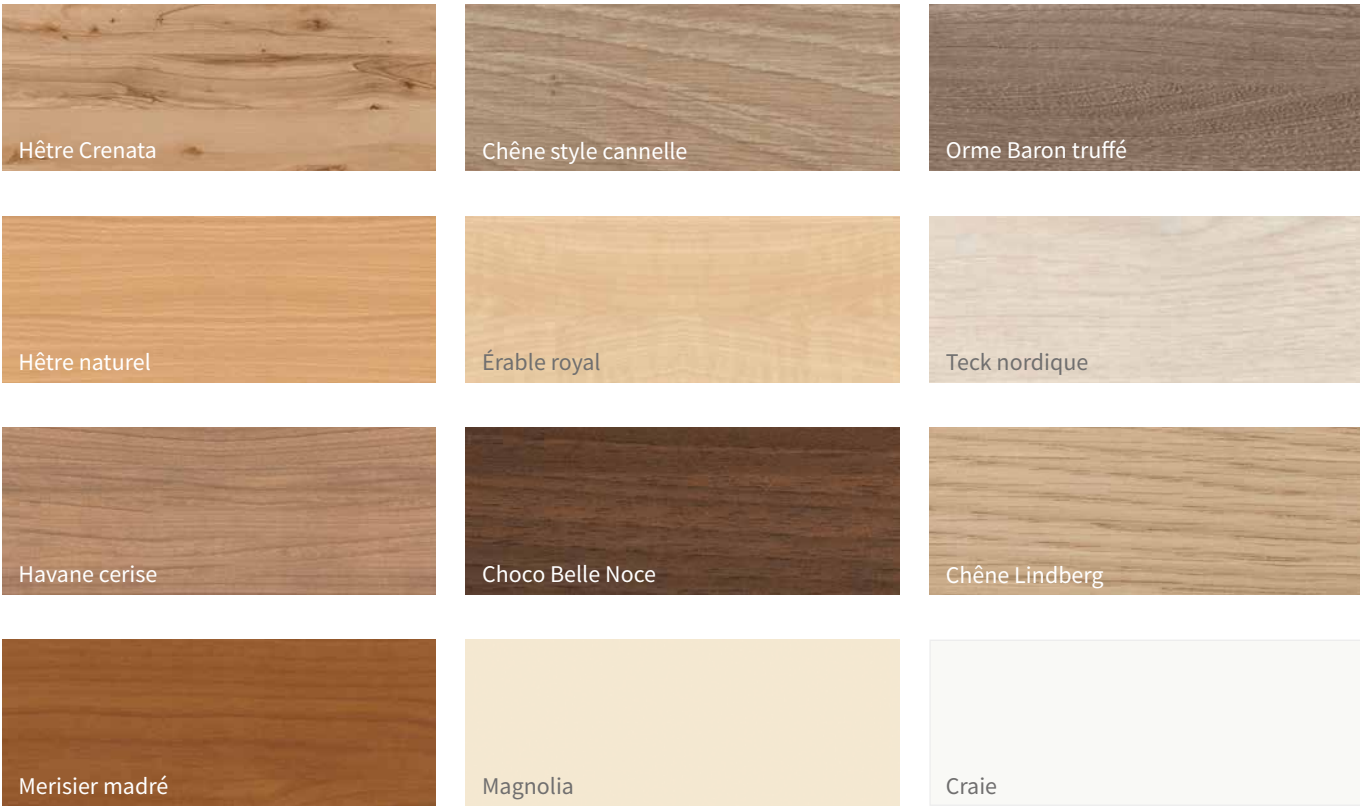

Panneaux de tête et de pied




Tissus et cuirs synthétiques


Des tissus et cuirs synthétiques attrayants sont disponibles pour les panneaux Nobla et les caches latéraux du système Vario Safe. Vous trouverez l'intégralité de l'offre sur le site internet de notre partenaire Delius. Veuillez respecter les instructions du fabricant lors du nettoyage des tissus et cuirs synthétiques.



Extrait des revêtements en tissu

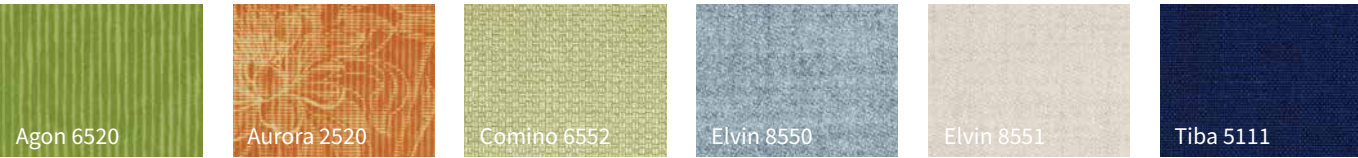

Extrait des revêtements en cuir synthétique

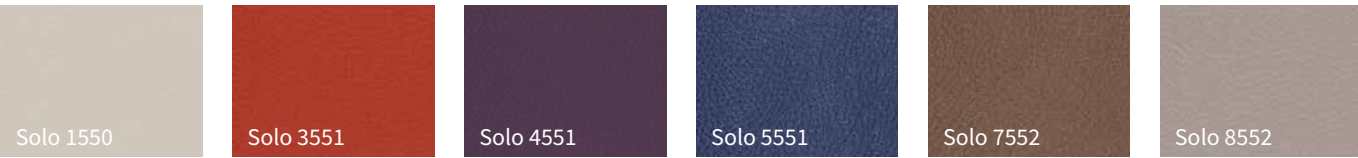

Rembourrage avec et sans surpiqûre pour la série de panneaux Nobla



Les panneaux rectilignes de la série Nobla peuvent devenir encore plus cosy grâce aux rembourrages fixes en tissu ou cuir synthétique. Les deux variantes avec surpiqûres sont particulièrement impressionnantes – le motif losanges distingué au charme britannique et le motif carreaux clair et moderne.



▲ Le motif à carreaux crée une apparence moderne et linéaire.



▲ Le motif classique à losanges crée une atmosphère élégante.



L'éclairage sous le lit disponible en option garantit une sécurité supplémentaire et permet de bien s'orienter, par exemple pour aller aux toilettes la nuit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre brochure dédiée aux accessoires

Des équipements utiles

Plus de sécurité et de confort pour votre lit de rêve



▲ Les housses de protection disponibles pour les panneaux et les éléments latéraux empêchent les résidents de se blesser en se cognant.



▲ Il est recommandé d'utiliser le matelas de protection anti-chute conçu en mousse composite d'une épaisseur de 3 cm pour une protection maximale contre les blessures par chute.



▲ Le galet déflecteur protège le lit et les murs lors des déplacements horizontaux et verticaux.

CLAIREMENT MEILLEUR L'écarteur



• Les écarteurs de mur préviennent les dommages liés aux collisions avec le mobilier et les prises de courant lors du déplacement du lit



▲ La potence aide à trouver une position confortable dans le lit.



▲ La lampe de lecture Sola fournit une lumière agréable et dégage peu de chaleur.



Service technique

Nos prestations - adaptées à vos exigences

Les lits hospitaliers et de soins de grande qualité du groupe Stiegmeyer sont accompagnés d'un service tout aussi qualitatif. Notre portefeuille de prestations comprend les activités clés que sont le contrôle, la remise en état, la formation et le conseil.

Nous suivons ici complètement les souhaits et les exigences de votre société. Peu importe comment vous souhaitez nous contacter, plusieurs choix s'offrent à vous. Les interlocuteurs personnels au téléphone vous aident pour commander les pièces de rechange et vous offrent un support technique complet. Plus de 50 collaborateurs du service technique se chargent sur site chez les clients des contrôles et des remises en état.

Notre service prend en charge tous les produits Stiegmeyer avec des pièces de rechange, même jusqu'à 15 ans après l'achat. À Herford, Stiegmeyer exploite un centre de service ultramoderne avec 3 000 mètres carrés de surface de stockage. Dans cet entrepôt automatisé se trouvent 7 500 articles en moyenne qui peuvent être expédiés dans toute l'Allemagne dans un délai court en règle générale. Vous pouvez aussi commander ces articles confortablement en ligne, sur notre portail de service :

<https://service.stiegmeyer.com/en/EUR/login>



+49 5221 185 777
Lu-je de 08h00 à 16h30
Ve de 08h00 à 14h00



service@stiegmeyer.com

Pièces de rechange

Les clients peuvent commander à tout moment des pièces de rechange depuis notre portail de service. Les listes de favoris personnalisées ainsi que la consultation de tous les documents importants et le suivi des livraisons par Track & Trace garantissent confort et transparence. Il est possible de planifier à l'avance la gestion des lits dans l'établissement.

Contrôle des lits

Le contrôle des lits peut prendre la forme d'une inspection ou d'une maintenance. Lors de l'inspection, nous évaluons l'état technique du lit. Cela permet de déduire les mesures adéquates pour chaque lit. En plus de ces prestations, la maintenance englobe des mesures de remise en état préventives – par exemple l'ajustage des freins. La maintenance consiste à maintenir l'état de consigne. L'inspection et la maintenance englobent toujours les prescriptions spécifiques à chaque pays ainsi qu'un rapport de service que vous pouvez aussi consulter en ligne.

Réparation rapide du lit

À titre de fabricant, nous garantissons la livraison de pièces de rechange d'origine en un temps record. Nos collaborateurs réparent les dommages sur vos lits de manière rapide, compétente et avec un très bon rapport qualité-prix. Les remises en état particulières, les modifications ou les rénovations complètes sont effectuées dans notre centre de service à Herford.

Équipements et options

Variante de modèle	Libra – Standard	Libra – Variante movo	Libra – Variante espace au sol Plus	Libra partner
Dimensions et poids				
Dimensions extérieures avec – le système de protection à barreaux discontinus combinable ⁴⁾ – le système de protection à barreaux continus ⁴⁾ (en fonction de l'encadrement en bois)	avec une largeur de sommier de 90 cm env. 100,3 x 209,4 cm avec une largeur de sommier de 100 cm env. 110,3 x 209,4 cm			– – –
Dimensions extérieures avec – le système de protection à barreaux discontinus	avec une largeur de sommier de 90 cm env. 104,0 x 209,4 cm avec une largeur de sommier de 100 cm env. 114,0 x 209,4 cm			avec une largeur de sommier de 2 x 90 cm env. 195,6 x 209,4 cm 90 x 200 cm
Sommier (dimensions du matelas)	env. 90 x 200 cm ou 100 x 200 cm ⁴⁾			
Répartition du sommier (RB / partie assise / RC / RJA)	env. 72 – 25 – 33 – 54 cm			
Compensation de la longueur du relève-buste	env. 8 cm			
Charge de travail sûre	225 kg			2 x 225 kg
Passage sous le lit	env. 15 cm	17,5 cm	ca. 15 cm ²⁾	env. 15 cm
Poids total	env. 135 kg			env. 270 kg
Moteurs				
Entièrement motorisé	✓	✓	✓	✓
Concept de motorisation 24 volts avec transformateur externe	0	0	0	–
Entraînement 230 volts	✓	✓	✓	✓
Composants électroniques				
Télécommande (verrouillage sélectif)	✓	✓	✓	✓
Télécommande supplémentaire pour position de décline	0	0	0	–
Éclairage sous le lit	0	0	0	0
Batterie plomb-gel	0	0	0	0
Télécommande éclairée avec Trendelenburg	0	0	0	–
Télécommande éclairée sans Trendelenburg	–	–	–	✓
Systèmes de protection				
Système de protection à barreaux continus DSE Easy Click	✓	✓	✓	–
Système de protection combiné KSE Easy Click	0	0	0	–
Système de protection à barreaux discontinus avec Vario Safe	0	0	0	0
Sans système de protection	0	0	0	–
Sommiers				
Sommier à lamelles métalliques	✓	✓	✓	✓
Sommier partagé en 4 parties, ajustement électrique	✓	✓	✓	✓
Sommier pivotant en position de proclive	✓	✓	✓	✓
Sommier pivotant en position de décline	0	0	0	–
Inserts du sommier tout confort	0	0	0	0
Sommier hygiénique	0	0	0	0
Séparation simple du châssis	✓	✓	✓	✓
Largeur du sommier 100 cm	0	0	0	–
Largeur du sommier 90 cm	✓	✓	✓	✓
Roulettes				
Doubles roulettes	Ø 50 mm	Ø 100 mm	Ø 50 mm 8 x	Ø 50 mm
Blocage dans le sens axial	✓	–	✓	–
Blocage des roulettes central	0	✓	–	✓
Systèmes de déflecteurs muraux				
Galet déflecteur	0	0	0	–
Écarteurs de mur sur le châssis	0	0	0	0
Plages de réglage				
Réglage de la hauteur	env. 25 – 80 cm	env. 28 – 83 cm	env. 25 – 80 cm	env. 25 – 80 cm
Réglage du relève-buste jusqu'à env. 70°	✓	✓	✓	✓
Réglage du relève-cuisses jusqu'à env. 40°	✓	✓	✓	✓
Réglage du relève-jambes jusqu'à env. 22°	✓	✓	✓	✓
Position de proclive jusqu'à env. 12°	✓	✓	✓	✓
Position de décline jusqu'à 12°	0	0	0	–
Divers				
Éléments d'appui avec lamelles métalliques faciles à nettoyer	✓	✓	✓	✓
Encadrement en bois au choix d'après brochure (les dimensions varient selon le type de système de protection et le modèle des panneaux)	✓	✓	✓	Panneaux : Nobla, Nobla reha, Nobla mala
Caches Vario Safe	0	0	0	0
Décor en bois au choix d'après brochure	✓	✓	✓	✓
Revêtement métallique argenté	✓	✓	✓	✓
2 réceptacles côté tête pour potence/support de perfusion	✓	✓	✓	✓
Cache latéral derrière les systèmes de protection (non inclus avec le système de protection à barreaux discontinus)	✓	✓	✓	–
Activation d'urgence du relève-buste	0	0	0	–
Rallonge de lit d'env. 20 cm	0	0	0	0
Porte-literie ³⁾	0	0	0	–

✓ = Équipement standard
0 = en option – = pas disponible

²⁾ dans la position du sommier la plus basse

³⁾ pas possible avec le système de protection intégré et combiné

⁴⁾ pas pour Libra partner

STIEGELMEYERGROUP



Solutions for people who care

Le groupe Stiegmeyer est le principal fabricant allemand de lits médicaux pour les hôpitaux, les établissements de soins et les soins à domicile. Avec ses tables de nuit, meubles et systèmes d'assistance numériques modernes, il est aussi un fournisseur innovant de solutions globales. L'entreprise familiale développe avec succès des offres pour les marchés internationaux dans plus de 100 pays.

- Nos points forts :**
- Le développement des produits dans notre siège à Herford, en Allemagne – la production dans quatre usines modernes en Allemagne et en Pologne
 - La fabrication en Chine pour le marché asiatique
 - Des filiales et partenaires de distribution dans de nombreux pays
 - Un service de premier ordre avec une livraison fiable des pièces de rechange
 - Des formations et optimisations des processus pour nos clients
 - Une action durable avec un fort engagement social

1 100

COLLABORA-TEURS DANS LE MONDE ENTIER

11

SITES
en Allemagne, en Pologne, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Finlande, en Afrique du Sud et en Chine

 Des OFFRES sur mesure pour tous les MARCHÉS

CERTIFI-CATIONS internationales

PLUS DE

125 000

lits produits par an

15 ANS

de livraisons de pièces détachées

DISTRIBUTION dans plus de pays

100

 INGÉNIERIE ALLEMANDE

Notre expertise

Hôpital

Long séjour

Soins à domicile

Lits exclusifs

Mobilier

Service

Nos valeurs

Expérience

Humain

Fiabilité

Ciblé sur les solutions

Ouverture

Confiance

Nos marques

 STIEGELMEYER

 BURMEIER



STIEGELMEYERGROUP

Solutions for people who care



Siège / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 100
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com



Siège / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr


South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd.
The Estuaries - Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl

China
Stieglmeyer China Co. Ltd.
Poly Center, No. 8 South Wenhua Road
Dongping New Town, Shunde District
528300 Foshan
Phone +86 757 29878710 - 0
info@stieglmeyer.cn
www.stieglmeyer.cn

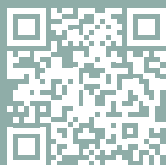

stieglmeyer-group.com